














Оdpovídá normě DIN EN ISO 9917-1 : 2007

Нáвод к použití



Popis produktu:
VOCO Ionofil Molar AC/Quick je rentgen kontrastní skloionomerní výplňový cement...

Indikace:
- Vyplně klívnových defektů v krčkové oblasti nebo eroze kořene, včetně V. třídy kavít

Způsob použití:
Připrava:
Vazebné spojení VOCO Ionofil Molar AC/Quick se sklovinou a dentinem je retenční a zároveň prevencí vzniku okrajových spár...

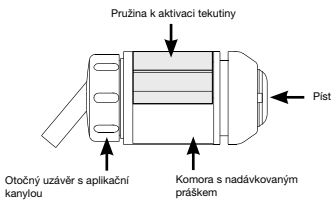

Aktivace:
Aktivovanou kapsli vložte do míchače kapslí (4000 - 4500 kmitů za minutu) a nechte přibližně 10 sekund míchat.

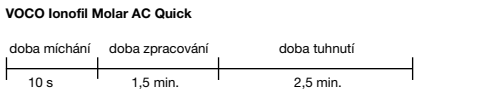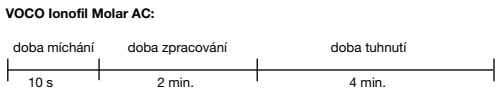

Po namíchání je doba zpracování VOCO Ionofil Molar AC/Quick zhruba 1,5 minutu (při pokojové teplotě).

Doplňující pokyny a upozornění:
VOCO Ionofil Molar AC/Quick obsahuje kyselinu polyakrylovou a fluorosilikát.

Pokyny pro skladování a způsob použití:
Skladujte VOCO Ionofil Molar AC/Quick na suchém místě, při teplotě 15 °C - 23 °C.

Naše preparáty jsou vyvinuté pro použití v zubním lékařství. Příslušné informace o přípravě - ústní/psané jsou podány podle našich nejlepších znalostí...




În conformitate cu standardele DIN EN ISO 9917-1 : 2007

Instrucțiuni de folosire



Descrierea produsului:
VOCO Ionofil Molar AC/Quick este un ciment ionomer de sticlă fotopolimerizabil, radioopac pentru obturații...

Indicații:
- Restaurări ale leziunilor cuneiforme respectiv eroziunilor de la nivelul smalțului și a suprafeței radiculare în zone cervicală, inclusiv cavitățile de clasa V

Modalitate de aplicare:
Preparare:
Adeziunea produsului VOCO Ionofil Molar AC/Quick la smalț și dentină previne formarea spațiilor marginale și creează retenții.

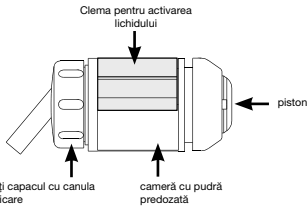

Activarea:
Pentru activare, lichidul aflat într-un plic sub clema activatoare trebuie să fie apăsat complet în interiorul capsulei.

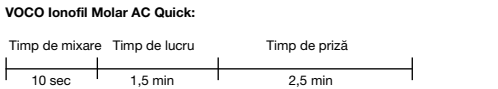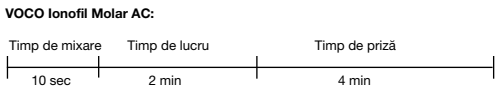

După mixare VOCO Ionofil Molar AC/Quick are un timp de lucru de aproximativ 1,5 min (la temperatura camerei).

Indicații suplimentare/precauții:
VOCO Ionofil Molar AC/Quick conține acid poliacrilic și silicat de fluor. A nu se folosi în conformitate cu toate condițiile pe care le avem și fără nici o obligație.

Informații de depozitare și metode de aplicare:
Depozitați VOCO Ionofil Molar AC/Quick într-un loc uscat, la temperaturi cuprinse între 15 °C - 23 °C.

Produsele noastre au fost concepute pentru uz stomatologic. În ceea ce privește aplicarea produselor livrate de noi, informațiile verbale și/sau scrise au fost oferite în conformitate cu toate condițiile pe care le avem și fără nici o obligație.




В съответствие с DIN EN ISO 9917-1 : 2007

Инструкции за употреба



Описание на продукта:
VOCO Ionofil Molar AC/Quick е рентгенконтрастен стъклено иономерен цемент за obturации в Апликационни капсули (AC) за директно нанасяне.

Показания:
- възстановяване на клиновидни дефекти и ерозии на цервикалния email или на корена, вкл. кавитети от клас V

Приложение:
Приложение:
Аdezията на VOCO Ionofil Molar AC/Quick към emaila и dentина предпазва от образуване на маргинални пукнатини и създава retenция.

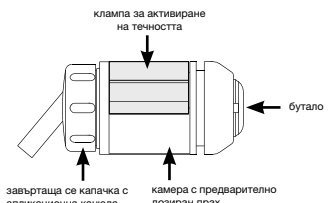

Активация:
За да настъпи активация, течността от камерата под клампата трябва да се изтласка напълно във вътрешната камера на капсулата.

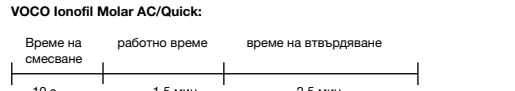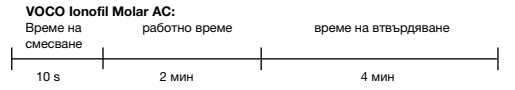

След смесването VOCO Ionofil Molar AC/Quick има работно време от около 1,5 мин при стайна температура. По време на нанасянето на obturацията работното поле трябва да се пази сухо.

Допълнителни съвети/предупреждения:
VOCO Ionofil Molar AC/Quick съдържа полиакрилова киселина и флуоросиликат.

Указания за съхранението и метода на апликация:
Съхранявайте VOCO Ionofil Molar AC/Quick на сухо място при температури от 15 °C - 23 °C.

Нашите продукти са предназначени за използване в стоматологията. Що се отнася до приложението на доставяните от нас продукти, устната и/или писмената информация, която предоставяме за тях е най-добрата, а също и разлагаме.



