

VALITSE SINULLE SOPIVIN
VALO- VALOKOVETTAJA

VALO X



VALO X^G



VALO X^S



VALO
GRAND



VALO



TERVETULOA PERHEESEEN

VALO X -valokovettajasarja laajenee.

Uudet VALO XG- ja VALO XS -valokovettajat on rakennettu samalle tehokkuuden, käytettävyyden ja kestävyysperiaatteille kuin VALO X. Näistä valokovettajista on saatavana useita malleja, joten voit helposti valita vastaanotollesi sopivimman.



TÄYDELLINEN VALIKOIMA VALOKOVETTAJIA

Kun alkuperäinen VALO -valokovettaja tuotiin markkinoille vuonna 2009, se muutti monen näkemyksiä valokovettajista. Täydentäessämme VALO -tuoteperhettä olemme halunneet taata, että jokainen uusi tuoteperheen valokovettaja on selkeästi parannettu versio edellisestä mallista. Samalla haluamme säilyttää juuri sen kestävyys, käytettävyyden ja tehon, jotka aikoinaan erottivat VALOn muista laitteista.

VALO X -valokovettajasarja on laajentunut ja tarjoaa jokaiselle hammaslääkärille valon, joka sopii hänen yksilölliseen työnkulkuunsa ja mieltymyksiinsä. Etsitpä suurempaa linssiä tai valoa, joka on suunniteltu käytettäväksi erityisesti lapsille ja oikomishoidossa, VALO XS-, VALO XG- ja VALO X -valoissa on viimeisintä tekniikkaa olevia osia ja ominaisuuksia, joten valinnastasi huolimatta saat valokovettajan, joka on tehty kestäväksi.

”VALO X on entistäkin parempi versio alkuperäisestä VALOsta. Olemme todella ylpeitä siitä.”

Neil Jessop, tutkimuksen ja tuotekehityksen varajohtaja



2009
VALO™ laajaspektrinen
LED-valokovettaja
tulee markkinoille



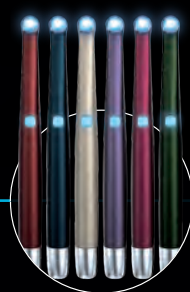
2011
VALO™ Cordless
ja VALO™ Ortho
-valokovettaja tulee
markkinoille



2016
VALO™ Grand
-valokovettaja tulee
markkinoille



2022
VALO™ X
-valokovettaja tulee
markkinoille



2025
VALO™ X Colors
-valokovettaja
tulee markkinoille



2026
VALO™ XG ja VALO™
XS -valokovettaja
tulee markkinoille



AKSELEROMETRI-TOIMINTO

- Helppoi ja nopea vaihto kovetus- ja diagnostisten tilojen välillä



5 VUODEN TAKUU



- Sisältää 5 vuoden valmistajan takuun



SUURI VAIKUTUSALUE

- Minimoi kovetusten määrä VALO X -valokovettajasarjan suuremmilla linseillä: VALO X -valossa on 12,5 mm:n linssi, VALO XG -valossa 11,7 mm:n linssi ja VALO XS -valossa 9,7 mm:n linssi

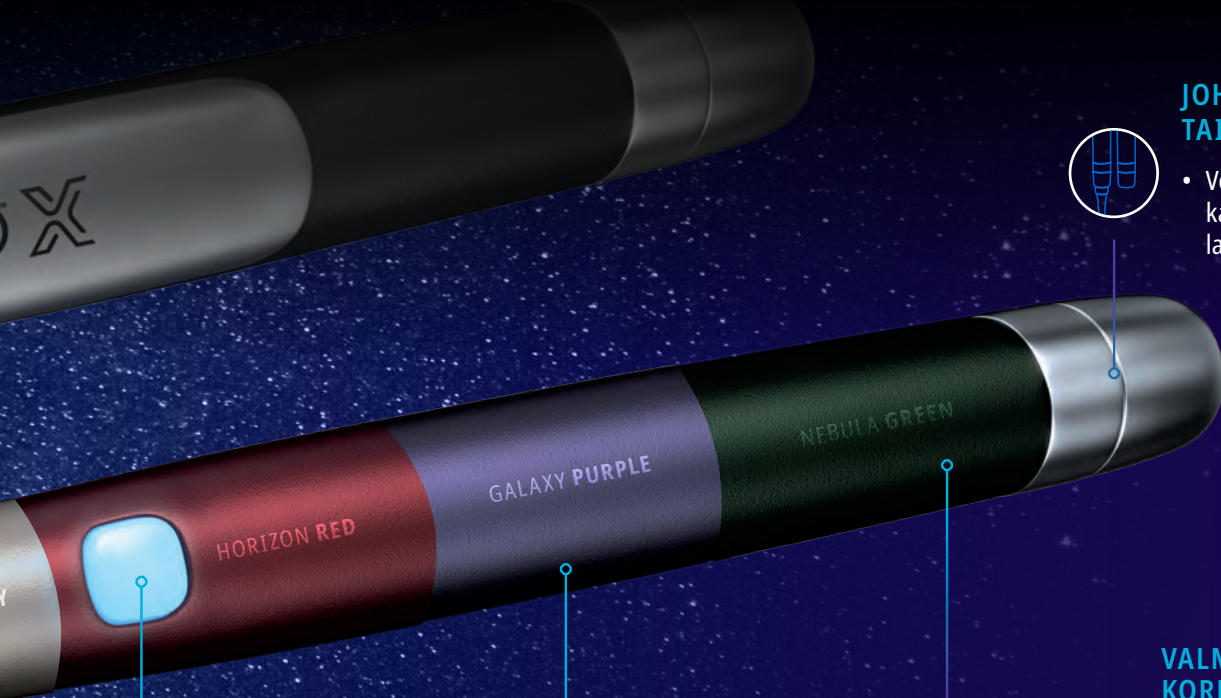


LAAJASPEKTRISET LEDIT

- Optimaalisesti rajattu valokeila tuottaa yhdenmukaista, tasaista tehoa, joka kovettaa kaikki valokovetteiset dentaalimateriaalit¹

YKSINKERTAINEN LIITÄNTÄ

Ei enää oikean kovetustilan etsimistä sokkona. VALO X-, VALO XG- ja VALO XS -valokovettajissa tilasta toiseen voi vaihtaa helposti. Vaihda kovetustilasta toiseen valon päällä olevalla aktivointipainikkeella ja diagnostiikkaa tukevasta tilasta toiseen laitteen alapuolella olevalla painikkeella. Voit käyttää sekä kovetustiloja että diagnostiikkaa tukevia tiloja akselerometritoiminnolla. Napauta vain valoa eteenpäin tai sivulle.



JOHDON KANSSA TAI ILMAN

- Voidaan käyttää johdon kanssa tai johdottomana laitteena

VALMITETTU KORKEALAATUISESTA ALUMIINISTA

- Unibody-muotoilu tekee valokovettajasta poikkeuksellisen kestävän sekä mahdollistaa erinomaisen lämmönhallinnan

NYT UNIVERSUMIN INSPIROIMISSA VÄREISSÄ*

- Nyt voit ilmaista tylisi vastaanotolla omalla, ajattomalla värillä

YKSINKERTAINEN KÄYTTÖLIITTYMÄ

- Kovetus- ja diagnostisten tilojen valinta, käyttö ja aktivointi ylä- ja alapainikkeilla tai akselerometritoiminnolla

DIAGNOSTIIKKAA TUKEVAT TILAT

Diagnostiikkaa tukevien tilojen avulla voit tehdä enemmän kovetusvalollasi. Diagnostinen mustavalotila auttaa näkemään fluoresoivat hiukkaset erilaisissa dentaalimateriaaleissa ja erottamaan ne luonnollisesta kiilteestä. Diagnostinen valkovalotila puolestaan tuottaa luonnonvaloa tarkkaa sävymäärittystä varten.

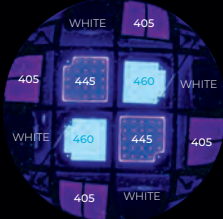
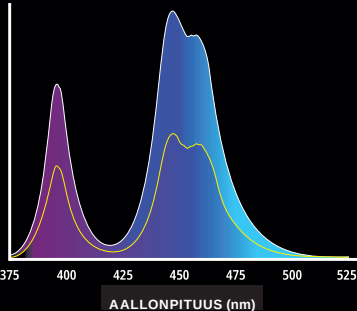
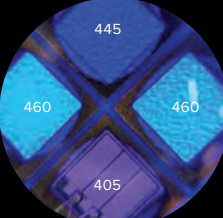
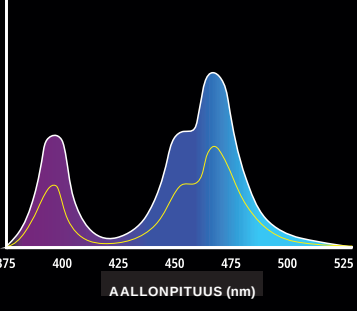
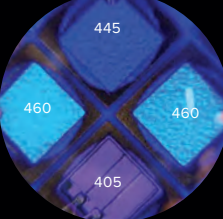
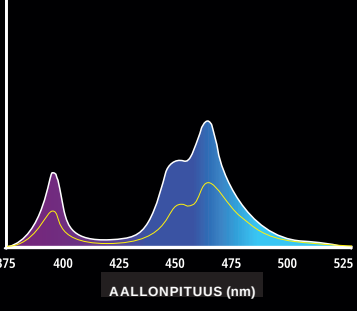
TARVIKELINSSIT

Linssien kiinnittäminen VALO X -valokovettajaan on helppoa: asetat vain tarvikelinssin lähelle VALO X -valokovettajan linssiä ja se kiinnittyy paikoilleen magneettisesti, tarvittaessa myös suojapussin päälle.

*Väri vaihtoehtot saatavilla vain VALO X -valolle.

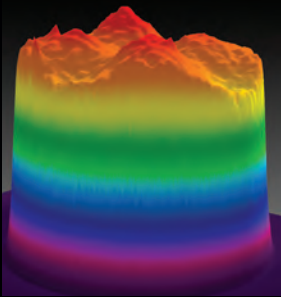
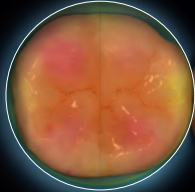
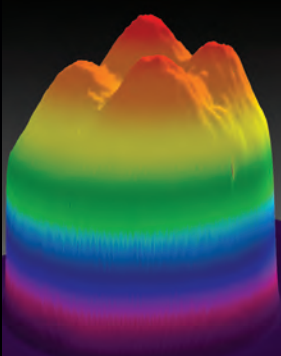
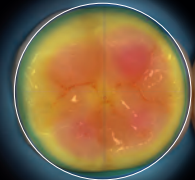
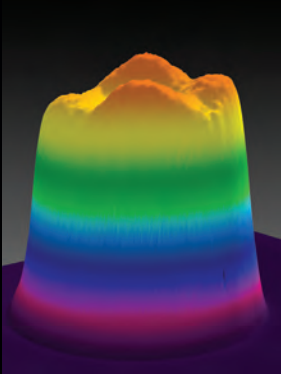
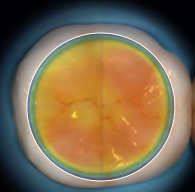
PARANNUKSIA SINNE MISSÄ NIITÄ TARVITAAN

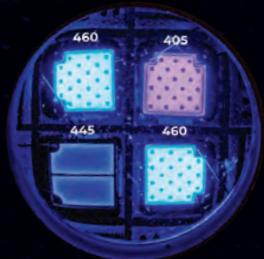
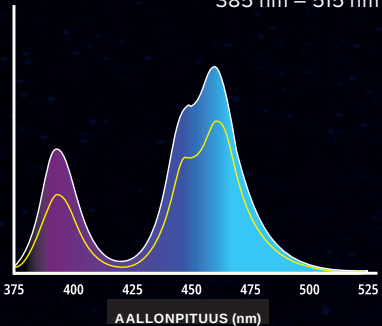
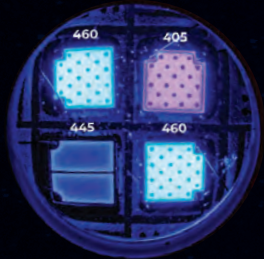
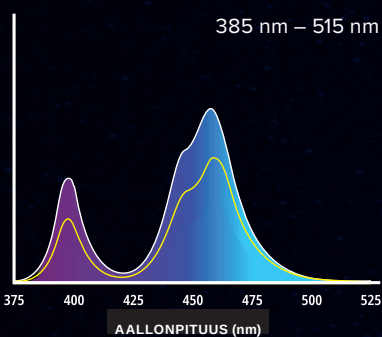
Liikkuvat potilaat, matriisit jotka estävät valon pääsyn koko restauration alueelle tai pienetkin käden liikkeet väärään aikaan voivat estää restauration täydellisen kovettumisen. VALO X- VALO XG- tai VALO XS -valokovettajalla sinun ei tarvitse jatkuvasti ja toistuvasti kovettaa samaa aluetta täysin kovetetun restauration takaamiseksi. VALO X -valokovettajasarjan suuremmat linssit voivat kovettaa suuremman alueen kerralla, mikä vähentää tarvittavia kovetuskertoja. Lisäksi optimaalisesti kollimoitu valokeila takaa yhtenäisen ja tasaisesti jakautuvan tehon niin, että se kattaa jopa restauration perimetrit.

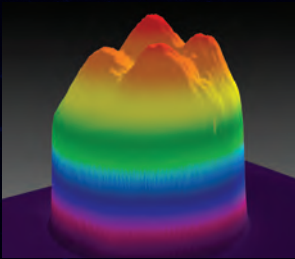
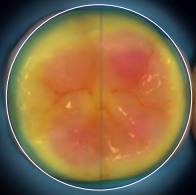
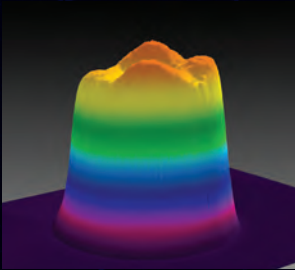
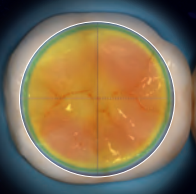
	TODELLINEN LINSSIN KOKO	LED-SIRUT	AALLONPITUUS	
VALO X	12,5 mm  (123 mm²)	 12 LEDiä	380 nm–515 nm  AALLONPITUUS (nm)	
VALO X ^S	11,7 mm  (108 mm²)	 4 LEDiä	380 nm–515 nm  AALLONPITUUS (nm)	
VALO X ^S	9,7 mm  (74 mm²)	 4 LEDiä	380 nm–515 nm  AALLONPITUUS (nm)	

LAAJAKIRJOINEN KOVETUS

Monissa valokovettajissa on vain yksi LED-siru, joka toimii yhdellä aallonpituudella. Se voi luoda säteeseen kuumia ja kylmiä pisteitä, mikä tekee yhtenäisestä kovettumisesta lähes mahdotonta. Alkuperäinen VALO valokovettaja kehitettiin ratkaisuksi tähän ongelmaan. Tehokas laajaspektri-LED tuottaa rajatun, tasaisen valokeilan, joten tiedät kovetustehon olevan erinomainen.

	TEHO (MW)	SÄTEILYVOIMAKKUUS (MW/CM ²)	JOULEA (J)	SÄDEPROFIILI	YLHÄÄLTÄ ALAS
	1350 STANDARD 2700 XTRA POWER	1100 STANDARD 2200 XTRA POWER	13,5 STANDARD 13,5 XTRA POWER		
	1077 STANDARD 2154 XTRA POWER	1000 STANDARD 2000 XTRA POWER	10,8 STANDARD 10,8 XTRA POWER		
	747 STANDARD 1493 XTRA POWER 1493 ORTHO QUADRANT	1000 STANDARD 2000 XTRA POWER 2000 ORTHO QUADRANT	7,5 STANDARD 7,5 XTRA POWER 4,48 x 5 ORTHO QUADRANT		

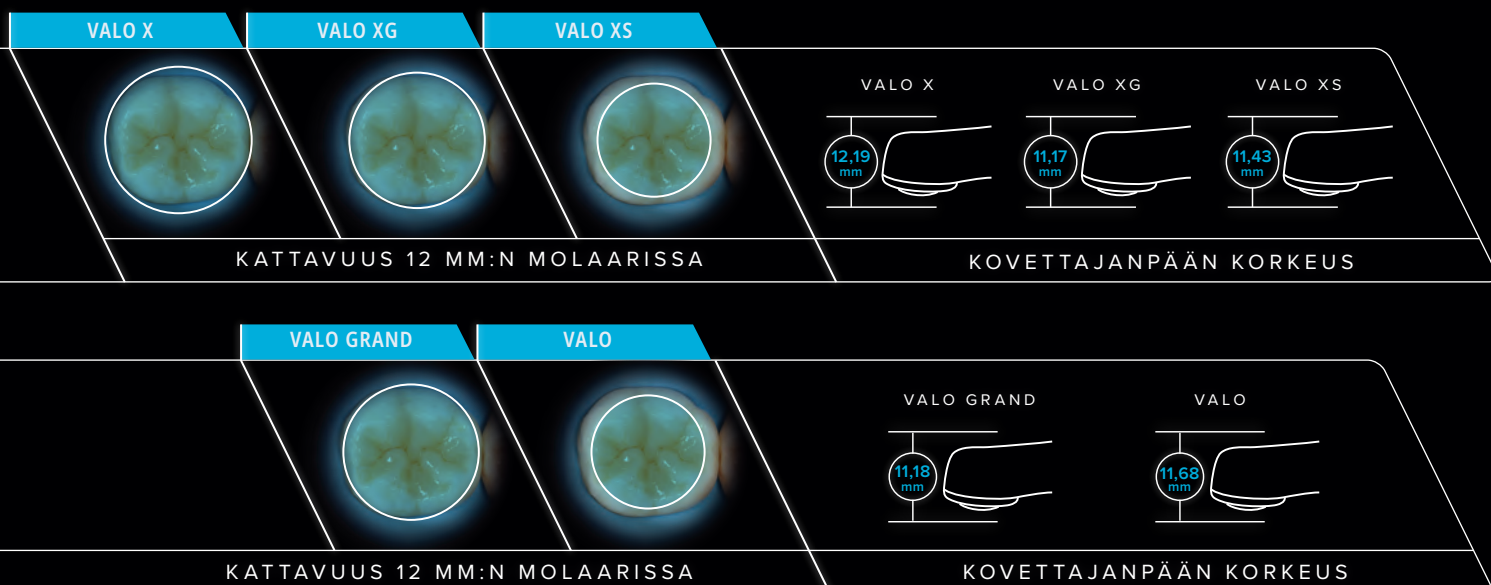
	TODELLINEN LINSSIN KOKO	LED-SIRUT	AALLONPITUUS
	11,7 mm  (108 mm²)	 4 LEDiä	385 nm – 515 nm  AALLONPITUUS (nm)
	9,7 mm  (74 mm²)	 4 LEDiä	385 nm – 515 nm  AALLONPITUUS (nm)

	TEHO (MW)	SÄTEILYVOIMAKKUUS (MW/CM ²)	JOULEA (J)	SÄDEPROFIILI	YLHÄÄLTÄ ALAS
	970 STANDARD 2260 XTRA POWER	900 STANDARD 2100 XTRA POWER	9,7 STANDARD 6,8 XTRA POWER		
	670 STANDARD 1570 XTRA POWER	900 STANDARD 2100 XTRA POWER	6,7 STANDARD 4,7 XTRA POWER		

ULOTTUVUUS, JONKA HALUAT

VALO X-, VALO XG- ja VALO XS -valokovettajien matala profiili mahdollistaa helpon ulottuvuuden takahampaiden restauraatioihin potilaiden mukavuutta uhraamatta.¹ Kapea pää voidaan asettaa suoraan kovetettavan kohdan päälle kaikkialla suussa. Siten valo ulottuu preparoinnin kaikille pinnoille. VALO X -valokovettajasarjan linssit ja matala profiili mahdollistavat suuremman restauraation kovettamisen niin, että valoa kohdistuu sopiva määrä oikeaan paikkaan.

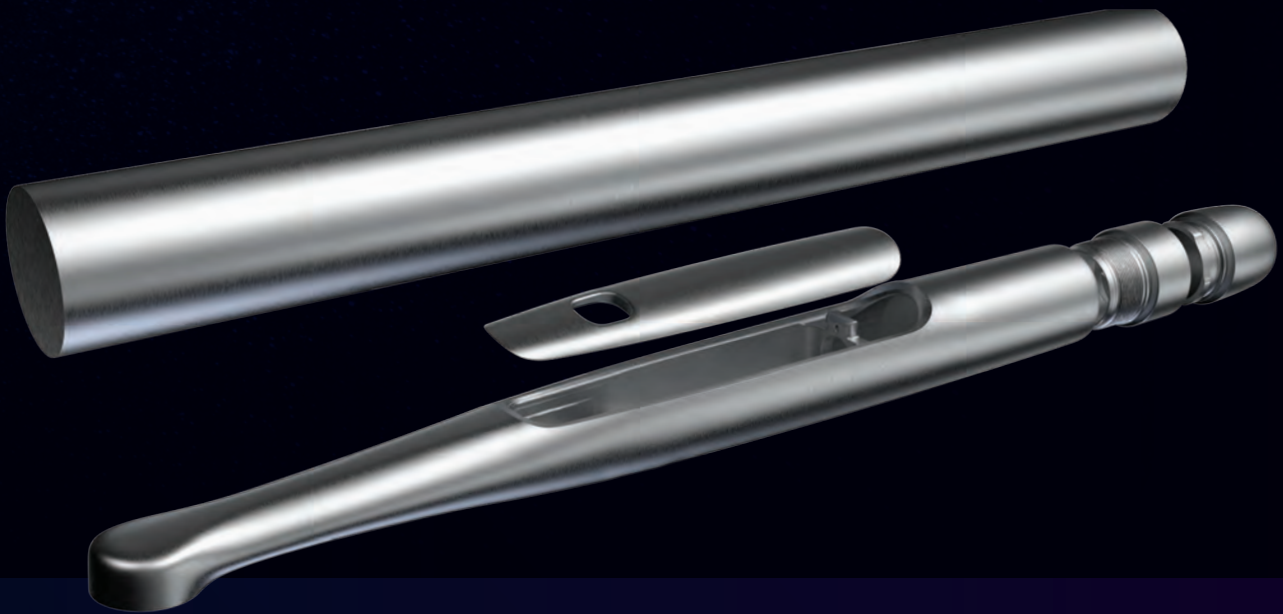
1. Moreira RJ, de Deus RA, Ribeiro MTH, et al. Effect of light-curing unit design and mouth opening on the polymerization of bulk-fill resin-based composite restorations in molars. *J Adhes Dent.* 2021;23(2):121–131. doi:10.3290/j.jad.b1079561



KESTÄVYYS, JOTA RAKASTAT

Valokovettajalla on ratkaiseva merkitys vastaanotollasi. Sen pitää kestää jokapäiväistä käyttöä ja joskus jopa tahattomia iskuja. Jos valokovettajasi on poissa käytöstä, se aiheuttaa sinulle työajan menetystä, lisäkustannuksia sekä ylimääräistä vaivaa. Langattomia VALO X-, VALO Grand- tai VALO-valokovettajia käyttäessäsi sinun ei tarvitse murehtia – se pystyy siihen.

Kaikki VALO-valokovettajat on luotu yhtenäisestä korkealuokkaisesta avaruusalumiinista, mikä tekee jokaisesta mallista poikkeuksellisen kestävän. Unibody-rakenne saa aikaan suljetun, vahvan valokovettajan, jossa ei ole heikkoja saumakohtia, ja josta myös lämpö poistuu tehokkaasti.



VALO-valokovettajien tuoteperhe on tehty kestäämään – tämän takaamme. Sinun ei tarvitse huolehtia uuden valokovettajan hankkimisesta aina muutaman vuoden välein; VALO-valokovettajalla on 5 vuoden valmistajan takuu, joten voit olla varma hankintasi arvon säilymisestä.

			
LEDIEN MÄÄRÄ	12	4	4
KOVETUSALUE	12,5 mm	11,7 mm	9,7 mm
PINTA-ALA	123 mm ²	108 mm ²	74 mm ²
ULOTTUVUUS / PÄÄN KORKEUS	12,19 mm	11,17 mm	11,43 mm
UNIBODY- MUOTOILU	✓	✓	✓
LAAJAKAISTAINEN SPEKTRI	✓	✓	✓
AKSELEROMETRI- TOIMINTO	✓	✓	✓
AKTIVOINTI	2 painiketta – tilan valinta ja teho	2 painiketta – tilan valinta ja teho	2 painiketta – tilan valinta ja teho
DIAGNOSTINEN VALO	Sisältää diagnostiikkaa tukevan mustavalo- ja valkovalotilan	Sisältää diagnostiikkaa tukevan mustavalotilan	Sisältää diagnostiikkaa tukevan mustavalotilan
LINSSITARVIKKEET	VALO X Kit toimitetaan 5 lisälinssillä. Valo X Colors Kit sisältää vain Diffuser lens-linssin.	5 erillistä	4 erillistä
JOHDOTON KÄYTTÖ	✓	✓	✓
JOHDOLLINEN KÄYTTÖ	Johtoadapteri sisältyy VALO X toimitukseen, mutta ei VALO X Color Kit:iin.	Johtosovitin myydään erikseen	Johtosovitin myydään erikseen
PARISTOT	Käyttö yhdellä paristolla Sisältää 2 paristoa	Käyttö yhdellä paristolla Sisältää 2 paristoa	Käyttö yhdellä paristolla Sisältää 2 paristoa

	
4	4
11,7 mm	9,75 mm
108 mm ²	74 mm ²
11,18 mm	11,68 mm
✓	✓
✓	✓
1 tilan valintapainike 2 aktivointipainiketta	1 tilan valintapainike 1 aktivointipainike
6 erillistä	5 erillistä
Erillinen yksikkö	Erillinen yksikkö
Erillinen yksikkö	Erillinen yksikkö
Käyttö kahdella paristolla Sisältää 4 paristoa	Käyttö kahdella paristolla Sisältää 4 paristoa



TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

	VALO X	VALO XG	VALO XS	VALO GRAND	VALO
Valotehon alue (nm)	380 nm–515 nm	380 nm–515 nm	380 nm–515 nm	385 nm–515 nm	385 nm–515 nm
Huippuaallon-pituudet (nm)	380–420 nm ja 420–515 nm	380–420 nm ja 420–515 nm	380–420 nm ja 420–515 nm	395–415 nm ja 440–480 nm	395–415 nm ja 440–480 nm

TEHO (mW)					
Standard	1350 mW	1077 mW	747 mW	970 mW	670 mW
Xtra Power	2700 mW	2154 mW	1493 mW	1615 mW	1570 mW
Ortho Quadrant	-	-	1493 mW	-	-

SÄTEILYVOIMAKKUUS* (mW/cm²)					
Standard	1100 mW/cm²	1000 mW/cm²	1000 mW/cm²	900 mW/cm²	900 mW/cm²
Xtra Power	2200 mW/cm²	2000 mW/cm²	2000 mW/cm²	2100 mW/cm²	2100 mW/cm²
Ortho Quadrant	-	-	2000 mW/cm²	-	-

KOKONAISENERGIA / JAKSO					
Standard	13,5 J (10 sekuntia)	10,8 J (10 sekuntia)	7,5 J (10 sekuntia)	9,70 J (10 sekuntia)	6,65 J (10 sekuntia)
Xtra Power	13,5 J (5 sekuntia)	10,8 J (5 sekuntia)	7,5 J (5 sekuntia)	6,30 J (3 sekuntia)	4,65 J (3 sekuntia)
Ortho Quadrant	-	-	4,48 J (3 sekuntia) x 5 pulssia	-	-

KOVETUSAIKATILAT					
Standard	10 sekuntia	10 sekuntia	10 sekuntia	20/15/10/5 sekuntia	20/15/10/5 sekuntia
Xtra Power	5 sekuntia	5 sekuntia	5 sekuntia	3 sekuntia	3 sekuntia
Ortho Quadrant	-	-	5 pulssia x 3 sekuntia (2 sekunnin automaattinen tauko pulssien välillä, jotta valon voi siirtää seuraavan hampaan kohdalle)	-	-

*Säteilyvoimakkuus on yhdenmukainen ISO 10650 -standardin kanssa, kun se mitataan gigahertsin spektrianalysaattorilla.

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

	VALO X	VALO XG	VALO XS	VALO GRAND	VALO
MITAT					
Cordless	22,6 x 2 x 2 cm	22,6 x 2 x 2 cm	22,4 x 2 x 2 cm	20,3 x 3,3 x 2,7 cm	20,3 x 3,3 x 2,7 cm
Corded	Johdon pituus: 1,80 m	23,5 x 2 x 2 cm Johdon pituus: 1,80 m	23,5 x 2 x 2 cm Johdon pituus: 1,80 m	23,5 x 2 x 2 cm Johdon pituus: 1,80 m	23,5 x 2 x 2 cm Johdon pituus: 1,80 m
RUNGON PAINO					
Cordless	Yksikkö: 108 g Paristojen kanssa: 136 g	Yksikkö: 105 g Paristojen kanssa: 134 g	Yksikkö: 105 g Paristojen kanssa: 133 g	Johdoton yksikkö: 150 gram Paristojen kanssa: 190 grams	Johdoton yksikkö: 150 gram Paristojen kanssa: 190 gram
Corded	Johdollinen: 158 g	Johdollinen: 156 g	Johdollinen: 156 g	Johdollinen yksikkö: 226 grams	Johdollinen yksikkö: 226 grams
Virta- käyttö	Johdoton/paristo tai johdollinen	Johdoton/paristo tai johdollinen	Johdoton/paristo tai johdollinen	Johdoton/ paristoyksikkö Johdollinen yksikkö	Johdoton/ paristoyksikkö Johdollinen yksikkö
Paristo	Suojattu, ladattava litiumioniakku 11MR14/65 3,7 V, 900 mAh 3,33 WH	Suojattu, ladattava litiumioniakku 11MR14/65 3,7 V, 900 mAh 3,33 WH	Suojattu, ladattava litiumioniakku 11MR14/65 3,7 V, 900 mAh 3,33 WH	Ladattava, litiumrauta- fosfaattiakku (LiFePO4) RCR123A, 3,2 V, 400 mAh 1,28 WH	Ladattava, litiumrauta- fosfaattiakku (LiFePO4) RCR123A, 3,2 V, 400 mAh 1,28 WH

Useita palkintoja
voittanut VALO™ -
valokovettajien
tuoteperhe.



TUTUSTU KOKO VALO-



CE MD

VALO X -pakkaus

- 1 kpl VALO X LED -valokovettaja
- 5 kpl lisävarustelinssejä
- 2 kpl ladattavia paristoja
- 1 kpl paristolaturi
- 1 kpl virtalähde (pariston lataamiseen tai virtasovittimelle)
- 1 kpl johtosovitin
- 1 kpl käsikappaleen pidike
- 1 kpl sinivalon estävät lasit
- 1 kpl suojaussien näytepakkaus

○ 5973 Black

CE MD

VALO X Colors -pakkaus

- 1 kpl VALO X LED -valokovettaja
- 1 kpl Diffuser Lens
- 2 kpl ladattavia paristoja
- 1 kpl paristolaturi
- 1 kpl valosuoja
- 1 kpl suojaussien näytepakkaus
- 1 kpl virtalähde (pariston lataamiseen tai virtasovittimelle*)

- 6496 Horizon Red
- 6497 Aurora Pink
- 6498 Stardust Gray
- 6499 Nebula Green
- 6519 Twilight Blue
- 6538 Galaxy Purple
- 6539 Onyx Black

**Johtoadapteri ei sisälly.*

TUOTEPERHEESEEN

VALO X^G

VALO X^S



CE MD

VALO XG -pakkaus

- 1 kpl VALO XG LED -valokovettaja
- 2 kpl ladattavia paristoja
- 1 kpl paristolaturi
- 1 kpl valosuoja
- 1 kpl suojapussien näytepakkaus
- 1 kpl virtalähde (pariston lataamiseen tai virtasovittimelle*)

○ 6383 Black

CE MD

VALO XS -pakkaus

- 1 kpl VALO XS LED -valokovettaja
- 2 kpl ladattavia paristoja
- 1 kpl paristolaturi
- 1 kpl valosuoja
- 1 kpl suojapussien näytepakkaus
- 1 kpl virtalähde (pariston lataamiseen tai virtasovittimelle*)

○ 6470 Black

VALO X / VALO XG / VALO XS

TARVIKKEET

Suojalasit

- 508 - UltraTect sinivalon estävät suojalasit

CE MD

Suojapussit

- 4665 - Suojapussit
– 100 kpl/pakkaus
- 5898 - Suojapussit
– 600 kpl/pakkaus

Virtalähde

- 4952 - Virtalähde
(yleispistokkeet)
1 kpl/pakkaus
- 5189 - Kiinteä johto
1 kpl/pakkaus
- 5437 - Paristot
2 kpl/pakkaus
- 4951 - Paristolaturi
1 kpl/pakkaus

*Johtoadapteri ei sisälly.

VALOTM
GRAND

VALOTM



CE MD

VALO Grand Cordless -pakkaus

- 1 kpl VALO Grand LED -valokovettaja
- 4 kpl ladattavia paristoja
- 1 kpl paristolaturi
- 1 kpl virtalähde yleispistokkeella, paristolaturiin
- 1 kpl VALO Grand -valosuoja
- 1 kpl käsikappaleen pidike
- 1 kpl suojapussien näytepakkaus

- **5972** Black
- **4864** Sapphire
- **4865** Red Rock

CE MD

VALO Cordless -pakkaus

- 1 kpl VALO Cordless LED-valokovettaja
- 4 kpl ladattavia paristoja
- 1 kpl paristolaturi
- 1 kpl virtalähde yleispistokkeella, paristolaturiin
- 1 kpl VALO Cordless -valosuoja
- 1 kpl käsikappaleen pidike
- 1 kpl suojapussien näytepakkaus

- **5941** Black

CE MD

VALO Grand Corded -pakkaus

- 1 kpl VALO Grand LED -valokovettaja
 - 2,13 m:n johto
- 1 kpl virtalähde yleispistokkeella
 - 1,83 m:n johto
- 1 kpl suojalaseja
- 1 kpl käsikappaleen pidike
- 1 kpl suojapussien näytepakkaus

- **5971** Black

VALO GRAND / VALO

TARVIKKEET

Cordless-lisävarusteet

- 5963** - Ladattavat paristot 2 kpl/pakkaus
- 5962** - Paristolaturi 1 kpl/pakkaus
- 5961** - Laturin virtalähde 1 kpl/pakkaus

Corded-lisävarusteet

- 5930** - VALO-virtalähde - 1,83 m:n johto
- 5933** - VALO-virtalähde - 4,88 m:n johto
- 1667** - VALO Surface -kiinnitysteline 1 kpl/pakkaus

TARVIKELINSSIT

Kaikki VALO-kovetusvalot ovat yhteensopivia tarvikelinssien kanssa. Tarvikelinssien avulla valosta saa monipuolisemman. VALO™-tarvikelinssit kiinnittyvät nopeasti ja helposti mukautuen siten kätevästi tarvitsemiesi lisätoimintojen mukaan.

KOVETUSLINSSIT

DIAGNOSTISET LINSSIT

POINTCURE™ LENS

Keskittää valon 2,5 mm:n aukkoon, joka on ihanteellista laminaattien ja kaikkien posliinikruunujen pistokovetukseen.



PROXICURE™ BALL LENS

Tukee matriisia ja auttaa saavuttamaan kuperan kontaktin, ennen osittaista valokovetusta ja sen aikana.



TRANSLUME™ LENS

Helpottaa hampaiden tai restauraatiomateriaalien halkeamien tai vaurioiden visualisoinnista ja paikantamista.



INTERPROXIMAL LENS

Mahdollistaa valkovalon kohdistamisen hampaiden väliin hammasvälien varjostumien, poikkeavuuksien tai kariksen havaitsemiseksi.



DIFFUSER LENS

Auttaa näkemään hammasresiniin sisältämät fluoresoivat hiukkaset käytettäessä diagnostiikkaa tukevaa mustavalotilaa. Tuottaa luonnollista valoa sävyn määrittämistä varten diagnostiikkaa tukevassa valkovalotilassa.



WHITE LIGHT LENS

Toimii luonnollisen valon lähteenä tarkkaa sävyn täsmäytystä varten.



VALO X	5890 (Sisältää)	5889 (Sisältää)	5891 (Sisältää)	5893 (Sisältää)	5892 (Sisältää)	-
VALO XG	4082	4081	4084	4658	-	4628
VALO XS	5934	5936	5937	4629	-	-
VALO GRAND	4082	4081	4084	4658	4319 (BLACK) 4628 (WHITE)	
VALO	5934	5936	5937	4629	5939 (BLACK) N/A (WHITE)	

CE MD

Suojapussit

- 4666 - VALO Grand Cordless 100 kpl/pakkaus
- 5896 - VALO/VALO Grand Cordless 600 kpl/pakkaus
- 4669 - VALO Grand Corded 100 kpl/pakkaus
- 5897 - VALO Grand Corded 600 kpl/pakkaus
- 4667 - VALO Cordless 100 kpl/pakkaus

Sinivalon estävät suojukset

- 3604 - VALO Grand -valosuoja 1 kpl/pakkaus
- 5929 - VALO Cordless -valosuoja 1 kpl/pakkaus
- 508 - UltraTect sinivalon estävät suojalasit

Käyttämällä näitä Ultradent-tuotteita yhdessä VALO-valokovettajan kanssa luot potilaillesi kauniita ja minimaalis-invasiivisia esteettisiä ratkaisuja helposti ja vaivattomasti.



Osamatriisit

Etsaus ja sidostus

Yhdistelmämuovi

Sementointi

Kovetus

Viimeistely

