



Shank	L mm	ISO	Order No.
Size			US No.
Ø ₁₀ mm			
RA	500 204 010 001...		C2.204...

0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,7
008	010	012	014	016	018
34	35	36	37	38	39
008	010	012	014	016	018

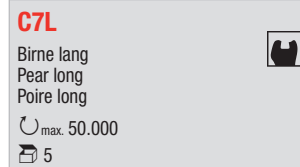

Shank	L mm	ISO	Order No.
Size			US No.
Ø ₁₀ mm			
RA	500 204 234 006...		C7L.204...

3,8	4,2	4,4
010	012	014
331L	332L	333L
010	012	014

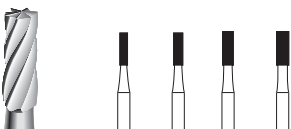

Shank	L mm	ISO	Order No.
Size			US No.
Ø ₁₀ mm			
RA	500 204 107 006...		C21.204...

4,2	4,2	4,4	4,4
010	012	014	016
57	58	59	60
010	012	014	016



Shank	L mm	ISO	Order No.
Size			US No.
Ø ₁₀ mm			
RA	500 204 137 006...		C21R.204...

4,2
012
1158
012

Klebstoffentferner

Zur Entfernung von Kleberresten nach der Entfernung kieferorthopädischer Brackets. Bei geringer Geschwindigkeit verwendete HM-Instrumente sind sehr wirkungsvoll zur Grobentfernung des verbliebenen Klebers und erzeugen nur eine geringe Rautiefe bei minimalem Schmelzverlust. Vorteile: eine Spezial TiN-Beschichtung glättet die Hartmetall-Oberfläche des Klebstoffentferners und verhindert so ein Zuschmieren der Instrumentenschneiden.

Adhesive Remover

For removal of residual resin after debon-ding of orthodontic brackets. Tungsten carbide burs at low speeds are most efficient for gross removal of the residual resin and produced the finest scratch pattern with the least enamel loss. Advantages: a special TiN coating smoothes the tungsten carbide surface of the adhesive remover, preventing clogging of the instrument blades during removal of the adhesive. This enables quiet, controlled removal of the residual adhesive.


Fraise de retrait des résidus de colle

Pour l'élimination des résidus de colle après la dépose des brackets d'orthodontie. Les fraises en carbure de tungstène à basse vitesse sont les plus efficaces pour l'élimination importante des résidus de résine. Avantage de la fraise de retrait des résidus de colle: un revêtement TiN spécial qui recouvre la surface en carbure de tungstène de la fraise de retrait des résidus de colle; ce revêtement permet d'éviter le bourrage des lames de l'instrument pendant le travail.



Shank	L mm	ISO	Order No.
Size			US No.
Ø ₁₀ mm			
RA	506 204 277 019...		T379X.204...

3,5	4,2
018	023
018	023

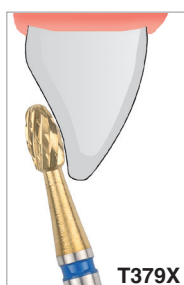

T379X.204.018 / 023

Abtrag von Kleberresten mit dem Klebstoffentferner.


Reduction of adhesive residue with the adhesive remover.

Retrait de résidus adhésifs.



Shank	L mm	ISO	Order No.
Size			US No.
Ø ₁₀ mm			
RA	506 204 137 019...		T21XR.204...


4,2
012
012

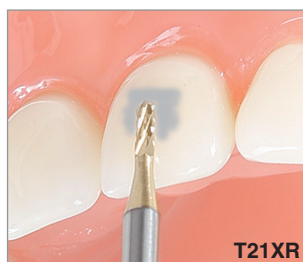

Abtrag von Kleberresten mit dem Klebstoffentferner.

Reduction of adhesive residue with the adhesive remover.

Retrait de résidus adhésifs.

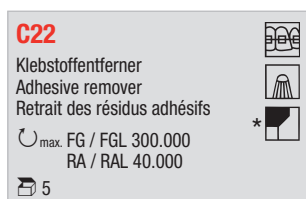

Shank	L mm	ISO	Order No.
Size			US No.
Ø ₁₀ mm			
FG	500 314 217 001...		C22GK.314...
FG	500 314 217 006...		C22AGK.314...
FGL	500 315 219 006...		C22ALGK.315...
RA	500 204 217 006...		C22AGK.204...
RAL	500 205 219 006...		C22ALGK.205...

5	5	8	5	8
016	016	016	016	016
016				
	016			
		016		
			016	
				016

“Glatte Kuppe” (GK) zum Schutz der Gingiva.

Smooth dome-shaped instrument head for gingival protection.
Bout arrondi et non-coupant pour la protection de la gencive.



Sicherheitsfase zur Vermeidung von Riefenbildung.
Safety chamfer section to avoid flute forming.
Chanfrein de sécurité pour éviter de rayer l'émail.

