

Yksinkertaisesti turvallinen tunne. Dürr Dental -hygieniajärjestelmä.

4 väriä, 4 aluetta - loogista ja turvallista



 **DÜRR
DENTAL**
THE BEST, BY DESIGN

Parasta on, kun voit luottaa järjestelmään

Jo vuonna 1965 Dürr Dental kehitti Orotol®-tuotteen myötä ensimmäisen imulaitteiden desinfiointiaineen. Se oli alku hygieniosaamisemme jatkuvalla laajentamiselle.


Tänä päivänä hammaslääkärit kaikkialla maailmassa luottavat Dürr Dental -hygieniajärjestelmään, mikä suojaa heidän vastaanottoaan monipuolisesti.

Neuvonta

- Jatkokoulutukset, tiimikoulutukset ja neuvonta paikan päällä
- Koulutettujen ohjaajien asiantuntemus
- Ratkaisukeskeiset käytännön neuvot yksilöllisesti sovitettuna vastaanoton tarpeisiin
- Tuki laadunvarmistusjärjestelmän luomisessa




Dürr Dental -hygieniajärjestelmä

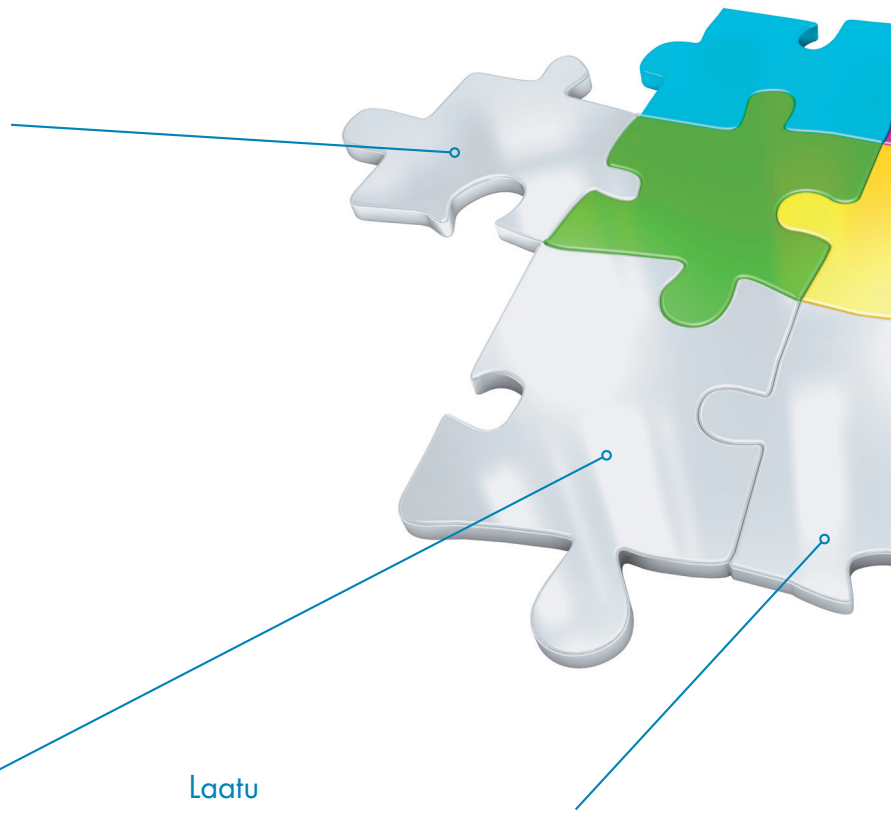

Palvelu

- Ammattimainen ja ratkaisukeskeinen tuoteneuvonta
- Ajankohtainen tietotarjonta Internetissä

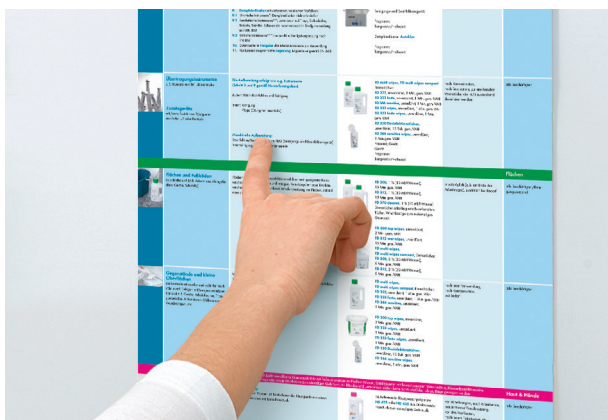

Laatu

- Korkeat tuotantostandardit - Made in Germany
- Turvallisuus määritettyjen ja valvottujen työvaiheiden ansiosta
- Vuosikymmenien kokemus desinfiointi- ja puhdistusaineiden valmistajana



Dürr Dental -hygieniäjärjestelmän tuotteiden ohella tarjoamme laajan palvelupaketin, mikä tukee vastaanototiimiäsi sen päivittäisessä työssä. Paikallinen neuvontapalvelumme on suoraan tiimisi tukena. Palvelumme auttaa sinua kaikissa tuotteitamme koskevissa kysymyksissä. Vuosikymmenien kokemus tuo mukanaan laatua sekä jatkuvia innovaatioita, joita on kehitetty vastaanoton tarpeisiin.



Valinnan helpottamiseksi

- Hygieniäjärjestelmän värijärjestelmä käyttöapuna
- Hygieniäjärjestelmän mukainen ja optimaalisesti varastoitava 2,5 litran pullo
- Tuotteiden helppo käsittely pullon ergonomisen muotoilun ansiosta
- Apuvälineet optimaaliseen annostukseen



Hygienia suojaa elämää

- Kaikki Dürr Dental -hygieniäjärjestelmän desinfointiaineet inaktivoivat koronaviruksen.
- Koronavirus on vaipallinen virus, joka voidaan inaktivoida rajoitetusti virusidisella desinfointiaineella.



4 väriä - 4 aluetta

- | | |
|-----------------------------|---------|
| ■ Sininen instrumenteille | Sivu 08 |
| ■ Vihreä pinnoille | Sivu 12 |
| ■ Roosa iholle ja käsille | Sivu 16 |
| ■ Keltainen erikoisalueille | Sivu 18 |

Parasta on, kun yksi järjestelmä tarjoaa kaiken

Infektioiden ehkäisyssä, desinfioinnissa ja puhdistuksessa mitään ei saa jättää sattuman varaan. Tästä syystä olemme todistaneet lukuisien testien avulla, että kaikki valmisteet täyttävät vaatimukset, jotka vastaanoton arjessa ovat ratkaisevia.

Turvallista

- Laaja vaikutusalue: bakterisidinen, tuberkulosidinen, fungisidinen, virusidinen ml. koronaviruset
- Testattu, luotettava vaikutus
- Desinfiointiaine poikkeuksetta VAH-listattu ja EN-yhdenmukainen
- Korkea desinfiointi- ja puhdistusvaikutus

Suosittellemme vastaanotollesi:



HD 410
Käsien desinfiointiaine

HD 435
Pesuneste



FD 366 sensitive
Herkkien pintojen desinfiointiaine

FD 360
Keinonahan puhdistus- ja hoitoina



FD 366 sensitive wipes
tai sensitive top wipes
-pyyhkeet



FD 322 tai FD 333
pikadesinfiointiaine



FD 333 forte
premium wipes

FD 333 top wipes



Yhteensopiva


- Ensiluokkaiset vaikuttavien aineiden yhdisteet
- Erityisen hellävaraista ja hoitavaa iholle
- Sopii erittäin hyvin materiaalien kanssa yhteen, johtavien laitevalmistajien suosittelema
- Kliinisesti testattu
- Biologisesti hajoava

Miellyttävää

- Käsitelly yksinkertaista ja tehokasta
- Kätevät, yhdenmukaiset pakkauskooot
- Puhdistus suunnitelman mukaan
- Annostelu korkeilla
- Erittäin taloudellista käytössä

Nopeaa

- Lyhyet vaikutusajat
- Kuivuu nopeasti jälkiä jättämättä
- Kätevä käyttää

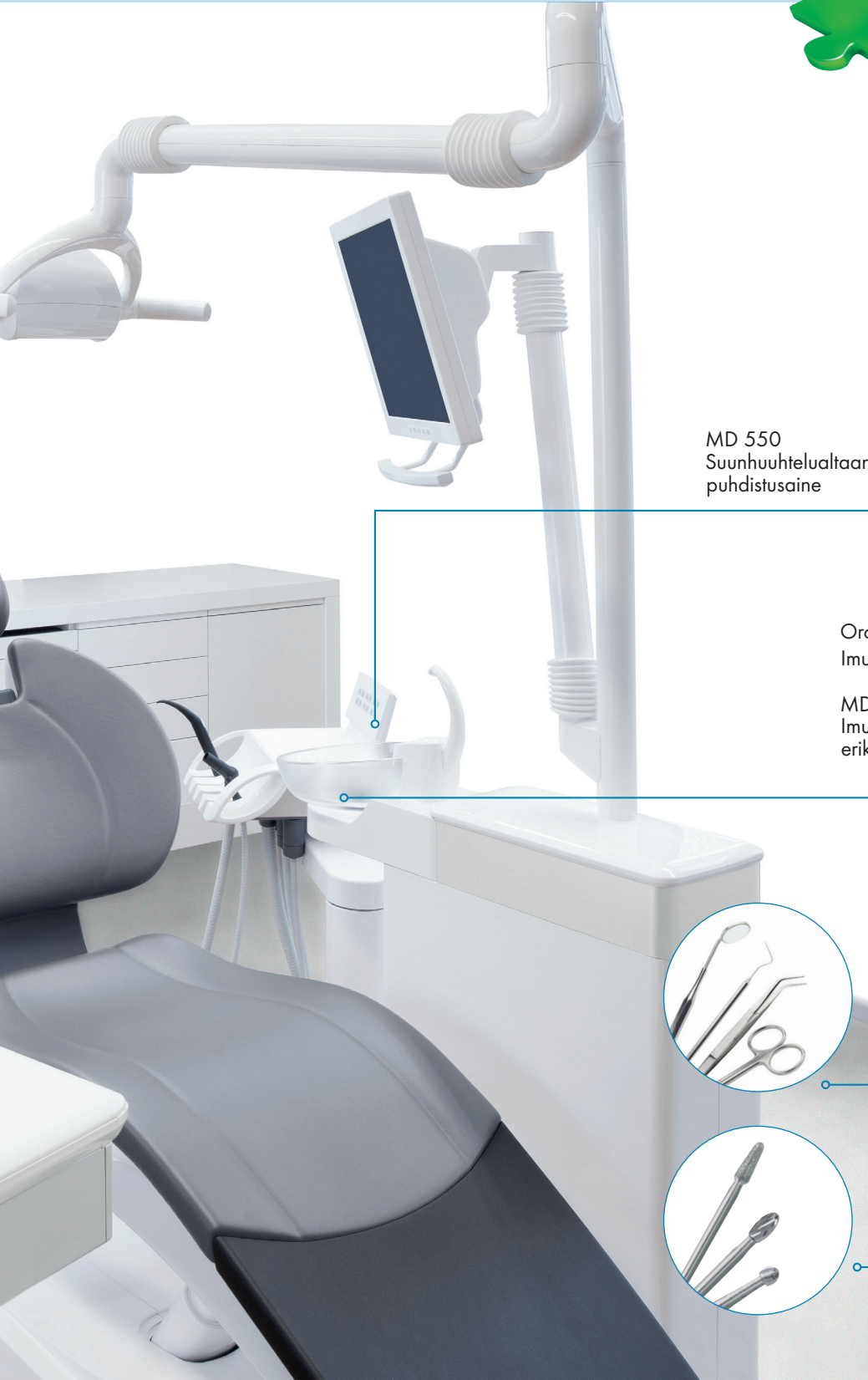

MD 550
Suunhuhtelultaan
puhdistusaine



Orotol® plus
Imulaitteiden desinfiointiaine

MD 555 cleaner
Imulaitteiden
erikoispuhdistusaine



ID 212 tai ID 213
Instrumenttien
desinfiointiaine



ID 220
Porien desinfiointiaine



Dürr Dental -hygieniatekniikka – maksimaalista tehokkuutta hygieniajärjestelmään

Dürr Dental on ollut lääketieteellisen tekniikan suunnannäyttäjä jo yli 80 vuoden ajan. Olemme aina tavoitelleet täydellisyyttä - myös hygieniatuotteiden suhteen. Tänä päivänä voimme tarjota ylpeänä lukuisia innovatiivisia teknisiä järjestelmäratkaisuja, joiden ansiosta hammaslääkäriin

Käyttö

Manuaalinen puhdistus
ja desinfiointi

Koneellinen käsittely
puhdistus- ja
desinfiointilaitteessa

Toimintotarkastus/
kontrolli ja
instrumenttien hoito

Steriilit pakkaukset
Hygopac View ja Hygofol



vastaanoton päivittäiset hygienia- ja valmistelutoimenpiteet sujuvat huipputehokkaasti lopputuloksen ollessa paras mahdollinen. Yhdessä Dürr Dental -hygieniajärjestelmän kanssa käytettävissäsi on lyömätön huipputiimi.

Höyrysterilointi
Hygoclave 40/50:ssä

Dokumentaatio

Säilyttäminen



Instrumentit



Desinfiointi ja puhdistus Instrumentit ja porat

■ ID 212 instrumenttien desinfiointiaine

Hyvin eri materiaalien kanssa
yhteensopiva tiiviste instrumenttien
puhdistukseen ja desinfiointiin



Kesto-aika
7 päivää

- Bakterisidinen, tuberkulosidinen ultraäänilaitteessa, hiivasieniä tuhoava, rajoitetusti virusidinen (vaipalliset virukset, ml. HBV, HCV, HIV ja koronavirus) sekä vaipattomat adeno- ja norovirukset
- Soveltuu yleisille, kirurgisille ja pyöriville instrumenteille
- Erityisen lyhyt vaikutusaika
- Sopii erittäin hyvin instrumenteille, joissa on kumi-/silikoniosia

Vaikuttavat aineet: Kvaternaariset ammoniumyhdisteet
Saatavilla: 2,5 l
Suosituksemme: Hygobox

■ ID 212 forte instrumenttien desinfiointiaine

Tiiviste yleisten, kirurgisten ja pyörivien
instrumenttien puhdistukseen
ja desinfiointiin



Kesto-aika
7 päivää

- Bakterisidinen, tuberkulosidinen ultraäänilaitteessa, hiivasieniä tuhoava, rajoitetusti virusidinen (vaipalliset virukset, ml. HBV, HCV, HIV ja koronavirus) sekä vaipattomat adeno- ja norovirukset
- Soveltuu yleisille, kirurgisille ja pyöriville instrumenteille
- Erittäin hyvä korroosiosuoja ja pitkä 7 päivän kesto-aika
- Nopea desinfiointi ja puhdistus

Vaikuttavat aineet: Alkyyliamiinit, kvaternaariset ammoniumyhdisteet
Saatavilla: 2,5 l
Suosituksemme: Hygobox

■ ID 213 instrumenttien desinfiointiaine

Tiiviste laajalla vaikutusalueella yleisten,
kirurgisten ja pyörivien instrumenttien puh-
distukseen ja desinfiointiin



Kesto-aika
14 päivää

- Bakterisidinen, tuberkulosidinen, mykobakterisidinen ultraäänilaitteessa, hiivasieniä tuhoava, rajoitetusti virusidinen (vaipalliset virukset ml. HBV, HCV, HIV sekä koronavirus), norovirukset, polyomavirukset SV40
- Erittäin taloudellista, sillä vaikutus säilyy 14 päivää
- Korroosiosuojan ansiosta hyvä materiaalien yhteensopivuus

Vaikuttavat aineet: Alkyyliamiinit, kvaternaariset ammoniumyhdisteet
Saatavilla: 2,5 l
Suosituksemme: Hygobox

■ ID 215 entsyymattainen instrumenttien puhdistusaine

Tiiviste manuaaliseen, entsyymattiseen
instrumenttien puhdistukseen
ennen desinfiointia



- Bakterisidinen, hiivasieniä tuhoava, rajoitetusti virusidinen (vaipalliset virukset, ml. HBV, HCV, HIV ja koronavirus)
- Suojaa henkilökuntaa mikrobisidisen vaikutuksen ansiosta
- Erinomainen puhdistusvaikutus - irrottaa itsepintaisimmankin lian
- Hyvä yhteensopivuus erilaisten materiaalien kanssa

Vaikuttavat aineet: Kvaternaariset ammoniumyhdisteet, guanidiiniyhdisteet
Saatavilla: 2,5 l
Suosituksemme: Hygobox

■ ID 220 porien desinfiointiaine

Täysin virusidinen, valmis käyttöliuos
pyörivien instrumenttien puhdistukseen
ja desinfiointiin



Täysin
virusidinen

- Bakterisidinen, mykobakterisidinen, tuberkulosidinen, hiivasieniä tuhoava, fungisidinen, virusidinen (vaipalliset virukset, ml. HBV, HCV, HIV ja koronavirus), sekä vaipattomat adenovirukset, polyomavirukset SV40, norovirukset ja poliovirukset
- Erinomainen puhdistusvaikutus, tehoaa erityisesti porien ja jyrsimien hienoihin rakenteisiin
- Huomattavan hyvä korroosiosuoja ja pitkä 7 päivän kesto-aika
- Erittäin lyhyet vaikutusajat

Vaikuttavat aineet: Alkoholit alkalisessa ympäristössä
Saatavilla: 2,5 l



Laitteet ja lisätarvikkeet

Hygobox

Tukeva, kestävä 3 litran kuljetus- ja desinfointilaatikko



- Ergonomisesti muotoillut kantokahvat turvalliseen kuljetukseen
- Kaatumisen estävä tiputusasento integroidulla sihdillä
- Erikoismuotoillun raon ansiosta instrumentit eivät takerru kiinni

Mitat (KxLxS): 13 x 32,5 x 21 cm

Väri vaihtoehdot: Antrasiitin värinen kansi, jossa sininen tai keltainen sihtiosa, kansi saatavissa 5 eri värinä valkoisella sihtiosalla

Suosituksemme: ID 212, ID 212 forte, ID 213, ID 215, MD 520, MD 535

Hygopac

Jatkuvakäyttöinen saumauslaite läpinäkyvien steriilipakkausten sulkemiseen



- Optimaalinen puristusaine saumattoman sauman laadun varmistamiseksi
- Kuljetusmekanismi mahdollistaa nopean ja rationaalisen työskentelyn
- Portaaton lämpötilansäätö takaa optimaalisen sauman

Mitat (KxLxS): 16,0 x 43,5 x 13,5 cm

Suosituksemme: Hygofol-pussi, Hygofol-rollat, instrumenttipöytä, Hygofol-asema

Hygopac View

Validoitavissa oleva jatkuvakäyttöinen saumaaaja steriilipakkausten standardin DIN EN ISO 11607-2 mukaiseen sulkemiseen.



- Erittäin kompaktin muotoilun ansiosta laite mahtuu pieneen tilaan
- Intuiitiivinen käyttö kosketusnäytöllä
- Erittäin joustava prosessin dokumentointi: tallennus SD-kortille ja verkkoyhteys

Mitat (KxLxS): 17,0 x 37,0 x 14,0 cm

Suosituksemme: Hygofol-pussit, Hygofol-rollat, instrumenttipöytä, Hygofol-asema



Laitteet ja lisätarvikkeet

Hygoclave 40/50

Hygoclave 40 ja 50 -mallien ansiosta Dürr Dental pystyy tarjoamaan ammattimaisen, luokan B höyrysteriloinnin, joka vakuuttaa suorituskyvyllään.

Sujuvan käyttökonseptinsa ansiosta päivittäisestä työskentelystä tulee erittäin tehokasta ja miellyttävää.



- Korkeatehoinen sterilointi- ja kuivausjärjestelmä
- Erinomaisen käyttömukavuuden varmistavat
 - intuitiivinen käyttökonsepti
 - korkearesoluutioinen 5 tuuman kosketusnäyttö
 - automaattinen oven lukitus
- Joustava tuoreveden syöttö ja integroitu tuoreveden laaduntarkastus
- Vähäinen veden- ja energiankulutus
- Kaikki näppärästi dokumentoituina, koska laite voidaan yhdistää vastaanoton verkkoon ja hammashoidon dokumentointiohjelmiin*

Mitat (KxLxS):

Hygoclave 40 (KxLxS): 49,3 x 48,4 x 65,4 cm

Hygoclave 40 Plus (KxLxS): 49,3 x 48,4 x 65,4 cm

Hygoclave 50: 49,3 x 48,4 x 64,2 cm

Hygoclave 50 Plus: 49,3 x 48,4 x 64,2 cm

*saatavilla vain Hygoclave 50 -mallistolle

Hygotest

Helix-testikappaleet
250 testiluskalla säännöllistä,
nopeaa ja helppoa
Helix-testiä varten.



- Standardien EN 867-5 ja ISO 11140-1 mukaan
- PCD (Process Challenge Device) ja 250 indikaattoria
- Voidaan käyttää erien tarkastusjärjestelmänä ja Bowie-Dick-testinä
- Aloitussarja 50 indikaattorilla autoklaavin ensimmäisen toimituksen yhteydessä

Hygofol

Hygofol-steriilipakkaus on
monikerroksisen laminaattikalvon
ja erittäin repäisynkestävän
sterilointipaperin luotettava ratkaisu



- Korkea lävistyslujuus ja erinomainen mekaaninen kestävyys
- Sauman korkea vetolujuus
- Hygofol – käytännöllinen, esivalmisteltu pussituote, 3 kokoa
- Hygofol yksilölliseen viimeistelyyn, 5 kokoa

Mitat:

Hygofol pussit (LxP): 7,5 cm, 10 cm tai 15 cm x jokainen 30 cm

Hygofol rullat (LxP): 5 cm, 7,5 cm, 10 cm, 15 cm tai 25 cm x jokainen 100 m



Hygoprint Easy

Lisävarusteena saatava tulostin tarjoaa mahdollisuuden sekä jaksoprotokollien että viivakoodietikettien tulostamiseen. Ne sisältävät kaiken mahdollisen tiedon suoritetuista sterilointijaksoista.



- Etikettikoko direktiivien mukaan – voidaan kiinnittää myös sauman ulkopuolelle
- Viivakoodi mahdollistaa skannauksen digitaaliseen järjestelmään
- Etiketin tiedot: laite (nimi ja sarjanumero), ohjelma, LOT, päiväys, käyttäjä (hyväksytty/henkilö), viimeinen käyttöpäivä

Hygoprint Easyn mitat (KxLxS) 16,9 x 12,5 x 22,1 cm

Hygoprint Easy -etikettien mitat: (KxL) 2,5 cm x 5,1 cm

Suosituksemme: Hygoprint Easy -etiketit ja -paperirullat

Hygoprint

Steriliipakkauksien merkintäjärjestelmä.



- Sterilointiprosessin nopea ja yksinkertainen dokumentointi
- Kaikki tarpeelliset tiedot sisältävä aukoton merkintä
- Erityisen helppoa ja kätevää

Suosituksemme: yksin- tai kaksinkertaisesti liimautuvat etiketit, 100 arkin dokumentointilehtiä, varavärirolla

Hygodem 90

Hygodem 90 edustaa korkeata laatua kompaktissa muodossa. Ionienvaihtolaitteisto valmistelees vesijohtoveden kolmessa patruunassa ja se voidaan liittää suoraan Hygoclave 50:een mitä pienimmissä tiloissa.



- Ionienvaihtolaitteisto
- Mukavuutta 3 ionivaihtopatruunan ansiosta
- Helppo huoltaa paineenalennusventtiilin ansiosta
- Helppo asennus pikaliittimen avulla
- Vähäinen tilantarve
- Edullinen hankintahinta

Suosituksemme: Patruunasarja Hygodem 90:lle

Hygopure 90

Käytettäessä Hygoclave-tuotetta kovassa päivittäisessä käytössä, tarvitaan vahva ja luotettava vedenkäsittelijä: Hygopure 90 -tuotteen kapasiteetti on korkea, mikä mahdollistaa demineralisoidun veden suurempien määrien tuoton (useamman litran) yhdellä kerralla.



- Käänteinen osmoosilaitteisto, sis. poistohanan ja varastointisäiliön
- Useampia suodatinvaiheita + korkeatehoinen membraani huoltoventtiilillä toiminnan tarkastamista varten
- Helppo asentaa pikaliittimen avulla
- Korkea kapasiteetti
- Mahdollista tuottaa useampi litra demineralisoitua vettä yhdellä kerralla
- eco-moduuli säästää vettä jopa 70 %

Suosituksemme: Patruunasarja Hygopure 90 -tuotteeseen, membraani DF50 Hygopure 90 -tuotteeseen, jaloteräksinen poistohana Hygopure 90 -tuotteeseen, läpäisyarvojen mittauslaite HMEC1, vedenpysäytysventtiili LD1

Pinnat

Desinfiointi ja puhdistus Pintojen desinfiointi

■ FD 300 pintojen desinfiointiaine

Täysin virusidinen ja alkoholiton tiiviste pintojen ja ei-invasiivisten lääkinnällisten laitteiden desinfiointiin



- Bakterisidinen, tuberkulosidinen, hiivasieniä tuhoava, virusidinen (vaipalliset virukset, ml. HBV, HCV, HIV ja koronaviruset, sekä vaipattomat adenovirukset, polyomavirukset SV40, norovirukset ja poliovirukset)
- Erityisen nopea vaikutusaika
- Taloudellista käyttöä: 250 litran 1% käyttöliuokseen asti
- Hyvä yhteensopivuus erilaisten materiaalien kanssa

Vaikuttavat aineet: Alkyyliamiinit, kvaternaariset ammoniumyhdisteet

Saatavilla: 2,5 l

Suosituksimme: FD multi wipes, FD multi wipes compact

■ FD 312 pintojen desinfiointiaine *

Alkoholiton tiiviste pintojen ja ei-invasiivisten lääkinnällisten laitteiden, vastaanoton kalusteiden ja lattioiden desinfiointiin



- Bakterisidinen, hiivasieniä tuhoava, rajoitetusti virusidinen PLUS (vaipalliset virukset, ml. HBV, HCV, HIV ja koronaviruset, sekä vaipattomat adeno- ja norovirukset)
- Taloudellista käyttöä: 250 litran 1% käyttöliuokseen asti
- Hyvä yhteensopivuus erilaisten materiaalien kanssa
- Miellyttävä tuoksu

Vaikuttavat aineet: Kvaternaariset ammoniumyhdisteet

Saatavilla: 2,5 l

Suosituksimme: FD multi wipes, FD multi wipes compact

Nopeasti tehoava desinfiointiaine

■ FD 322 pikadesinfiointiaine

Nopeasti vaikuttava käyttöliuos lääkinnällisten laitteiden ja vastaanoton kalusteiden pintojen desinfiointiin ja puhdistukseen



- Bakterisidinen, tuberkulosidinen, hiivasieniä tuhoava, fungisidinen, rajoitetusti virusidinen PLUS (vaipalliset virukset, ml. HBV, HCV, HIV ja koronaviruset, sekä vaipattomat adeno- ja norovirukset)
- Erittäin lyhyt vaikutusaika
- Kuivuu jälkiä jättämättä
- Hyvä yhteensopivuus erilaisten materiaalien kanssa

Vaikuttavat aineet: Alkoholit

FD 322 saatavilla: 750 ml Hygowipe Plus, 1 l, 2,5 l, 10 l

Suosituksimme: Suihkupää, 600 ml:n suihkepullo, FD multi wipes, FD multi wipes compact

FD 322 perfume free saatavilla: 2,5 l, 10 l

Suosituksimme: 600 ml -suihkupullo, FD multi wipes, FD multi wipes compact





■ FD 333 pikadesinfiointiaine

Nopeasti vaikuttava käyttöliuos lääkinällisten laitteiden ja vastaanoton kalusteiden pikadesinfioimiseen



- Bakterisidinen, tuberkulosidinen, hiivasieniä tuhoava, fungisidinen, rajoitetusti virusidinen PLUS (vaipalliset virukset, ml. HBV, HCV, HIV ja koronaviruset, sekä vaipattomat adeno- ja noroviruset)
- Hyvä yhteensopivuus erilaisten materiaalien kanssa
- Raikas sitruunantuoksu
- Kuivuu nopeasti

Vaikuttavat aineet: Alkoholit, kvaternaariset ammoniumyhdisteet

Saatavilla: 750 ml Hygowipe Plus, 1 l, 2,5 l, 10 l

Suosituksemme: Suihkepää, 600 ml:n suihkepullo, FD multi wipes, FD multi wipes compact

■ FD 333 forte pikadesinfiointiaine

Täysin virusidinen käyttöliuos lääkinällisten laitteiden ja lääketieteellisen välineistön pintojen pikadesinfioimiseen



- Bakterisidinen, mykobakterisidinen, tuberkulosidinen, hiivasieniä tuhoava, fungisidinen, virusidinen (vaipalliset virukset, ml. HBV, HCV, HIV ja koronaviruset, sekä vaipattomat adenoviruset, polyomaviruset SV 40, noroviruset ja polioviruset)
- Hyvä yhteensopivuus erilaisten materiaalien kanssa
- Raikas sitruunantuoksu
- Nopea desinfiointivaikutus

Vaikuttavat aineet: Alkoholit, kvaternaariset ammoniumyhdisteet

Saatavilla: 1 l, 2,5 l, 10 l

Suosituksemme: Suihkepää, 600 ml:n suihkepullo, FD multi wipes, FD multi wipes compact

■ FD 366 sensitive herkkien pintojen desinfiointiaine

Lääkinällisten laitteiden erityisen herkkien pintojen desinfiointiin ja puhdistukseen tarkoitettu, vähemmän alkoholia sisältävä käyttöliuos



- Bakterisidinen, tuberkulosidinen, hiivasieniä tuhoava, rajoitetusti virusidinen (vaipattomat virukset, ml. HBV, HCV, HIV ja koronaviruset, sekä vaipattomat noroviruset)
- Nopea desinfiointivaikutus
- Hoitoyksiköissä ihanteellinen yhdessä FD 360 -keinoahkapuhdistusaineen kanssa
- Tarkastettu yhteensopivuus materiaalien kanssa – johtavien hoitokonevalmistajien suosittelema

Vaikuttavat aineet: Alkoholit, kvaternaariset ammoniumyhdisteet

Saatavilla: 750 ml Hygowipe Plus, 1 l, 2,5 l, 10 l

Suosituksemme: Suihkepää, 600 ml:n suihkepullo, FD multi wipes, FD multi wipes compact

Hoito

■ FD 360 keinoahnan puhdistus- ja hoitoina

Puhdistusneste keinoahkapintojen perusteelliseen puhdistukseen ja hoitoon



- Materiaaleille hellävarainen puhdistusaine yhdistettynä hoitoinaeseen, auttaa säilyttämään tuotteen arvon
- Tehokas puhdistusvaikutus – puhdistaa kaikenlaiset likaläiskät, jäljet ja värjäytymät
- Tarkastettu yhteensopivuus materiaalien kanssa – johtavien hoitokonevalmistajien suosittelema
- Hoitoyksiköissä ihanteellinen yhdessä FD 366 sensitive -tuotteen kanssa

Ainesosat: Erikoisensidit, silikonyhdisteet ja avokadoöljypohjaiset hoitoinaet

Saatavilla: Sarjana, johon kuuluu 500 ml suihkepullo, 1 kiillotuspyyhe ja 9 erikoispuesientä

Suosituksemme: FD 366 sensitive, FD 366 sensitive wipes, FD kiillotuspyyhe

Pintojen desinfiointipyyhkeet

Alkoholittomat desinfiointipyyhkeet

■ FD 312 wet wipes* pintojen desinfiointipyyhke

Alkoholittomat desinfiointi- ja puhdistuspyyhkeet lattioille, vastaanoton kalustoille ym.



- Bakterisidinen, hiivasieniä tuhoava, rajoitetusti virusidinen (vaipalliset virukset ml. HBV, HCV, HIV ja koronaviruset)
- Riittäisää pintakäsittelyä jopa 8 m²
- Pyyhkeet repäisylujaa kennorakennetta
- Raikas tuoksu

Vaikuttavat aineet: Kvaternaariset ammoniumyhdisteet

Saatavilla: 15 pyyhkeen pakkaus

Pyyhekoko: 22 x 42 cm

Alkoholipitoiset desinfiointipyyhkeet

■ FD 322 premium wipes pikadesinfiointipyyhke FD 322 top wipes pikadesinfiointipyyhke FD 322 wipes pikadesinfiointipyyhke

Alkoholia sisältävät ja nopeasti vaikuttavat desinfiointi- ja puhdistuspyyhkeet lääkinnällisten tuotteiden pinnoille



- Bakterisidinen, tuberkulosidinen, hiivasieniä tuhoava, fungisidinen, rajoitetusti virusidinen PLUS (vaipalliset virukset, ml. HBV, HCV, HIV ja koronaviruset, sekä vaipattomat adenoviruset, polyomaviruset ja noroviruset)

- Erittäin lyhyt vaikutusaika
- Kuivuu jälkiä jättämättä
- Hyvä yhteensopivuus erilaisten materiaalien kanssa

Vaikuttavat aineet: Alkoholit

FD 322 premium wipes

Saatavilla: 80 pyyhkeen käyttörasia

Pyyhekoko: 14 x 19 cm

FD 322 wipes

Saatavilla: 100 pyyhkeen käyttörasia

Pyyhekoko: 20 x 30 cm

FD 322 top wipes

Saatavilla: 50 pyyhkeen pakkaus

Pyyhekoko: 17,5 x 25 cm

■ FD 333 wipes pikadesinfiointipyyhke FD 333 top wipes pikadesinfiointipyyhke

Alkoholipitoiset käyttövalmiit desinfiointi- ja puhdistuspyyhkeet lääkinnällisten laitteiden pinnoille



- Bakterisidinen, tuberkulosidinen, hiivasieniä tuhoava, fungisidinen, rajoitetusti virusidinen PLUS (vaipalliset virukset, ml. HBV, HCV, HIV ja koronaviruset, sekä vaipattomat adeno- ja noroviruset)

- Nopea desinfiointivaikutus
- Kuivuu nopeasti
- Tuoksuton

Vaikuttavat aineet: Alkoholit, kvaternaariset ammoniumyhdisteet

FD 333 wipes

Saatavilla: 110 pyyhkeen käyttörasia

Pyyhekoko: 14 x 22 cm

FD 333 top wipes

Saatavilla: 50 pyyhkeen pakkaus

Pyyhekoko: 17,5 x 25 cm

■ FD 333 forte premium wipes pikadesinfiointipyyhke, FD 333 forte wipes pikadesinfiointipyyhke

Täysin virusidiset käyttövalmiit lääkinnällisten laitteiden ja lääketieteessä käytettävien välineiden pintojen desinfiointi- ja puhdistuspyyhkeet



- Bakterisidinen, mykobakterisidinen, tuberkulosidinen, hiivasieniä tuhoava, fungisidinen, virusidinen (vaipalliset virukset, ml. HBV, HCV, HIV ja koronaviruset, sekä vaipattomat adenoviruset, polyomaviruset SV 40, noroviruset ja polioviruset)

- Nopea desinfiointivaikutus
- Erityisen suuret pyyhkeet
- Raikas sitruunantuoksu

Vaikuttavat aineet: Alkoholit, kvaternaariset ammoniumyhdisteet

FD 333 forte premium wipes

Saatavilla: 80 pyyhkeen käyttörasia

Pyyhekoko: 14 x 19 cm

FD 333 forte wipes

Saatavilla: 100 pyyhkeen käyttörasia

Pyyhekoko: 20 x 30 cm

■ FD 350 desinfiointipyyhkeet

Alkoholia sisältävät ja nopeasti vaikuttavat desinfiointi- ja puhdistuspyyhkeet lääkinnällisten laitteiden pienille pinnoille



- Bakterisidinen, tuberkulosidinen, hiivasieniä tuhoava, fungisidinen, rajoitetusti virusidinen PLUS (vaipalliset virukset, ml. HBV, HCV, HIV ja koronaviruset, sekä vaipattomat adeno- ja noroviruset)
- Nopea desinfiointivaikutus
- Kuivuu nopesti ja jälkiä jättämättä
- 3 erilaista tuoksua: Classic, Flower, Lemon

Vaikuttavat aineet: Alkoholit
Saatavilla: 110 pyyhkeen käyttörasia
Pyyhekoko: 14 x 22 cm



■ FD 366 sensitive wipes ja FD 366 sensitive top wipes herkkien pintojen desinfiointipyyhkeet

Käyttövalmiit desinfiointi- ja puhdistuspyyhkeet lääkinnällisten laitteiden herkille pinnoille



- Bakterisidinen, tuberkulosidinen, hiivasieniä tuhoava, rajoitetusti virusidinen (vaipalliset virukset, ml. HBV, HCV, HIV ja koronaviruset), noroviruset
- Nopea desinfiointivaikutus
- Erityisen suuret pyyhkeet
- Tuoksuton

Vaikuttavat aineet: Alkoholit, kvaternaariset ammoniumyhdisteet
FD 366 sensitive wipes
Saatavilla: 100 pyyhkeen käyttörasia
Pyyhekoko: 20 x 30 cm

FD 366 sensitive top wipes
Saatavilla: 50 pyyhkeen pakkaus
Pyyhekoko: 17,5 x 25 cm

Kuivat pyyhkeet

■ FD multi wipes

Yleiskäyttöiset, kuivat pyyhkeet, kostutettavissa desinfiointi- ja puhdistusaineilla



- Yleiskäyttöiset pyyhkeet yhdistettynä pintadesinfiointiaineeseen
- Nukkaamattomat ja repäisylujat
- Erittäin hyvä kosteus, eivät naarmuta pintoja
- Erittäin edulliset

Saatavilla: 180 pyyhkeen käyttörasia
Pyyhekoko: 20 x 30 cm
Suosituksemme: FD 300, FD 312, FD 322, FD 333, FD 333 forte, FD 366 sensitive, seinäpidike FD multi wipes -laatikolle

■ FD multi wipes compact

Yleiskäyttöiset, kuivat pyyhkeet, kostutettavissa desinfiointi- ja puhdistusaineilla



- Yleiskäyttöiset pyyhkeet yhdistettynä pintadesinfiointiaineeseen
- Nukkaamattomat ja repäisylujat
- Erittäin hyvä kosteus, eivät naarmuta pintoja
- Kompakti laatikko, erittäin isot pyyhkeet

Saatavilla: 60 pyyhkeen käyttörasia
Pyyhekoko: 29 x 30 cm
Suosituksemme: FD 300, FD 312, FD 322, FD 333, FD 333 forte, FD 366 sensitive

■ FD Kiillotus

Mikrokuituliina erikoiskuiduilla materiaaliystävälliseen puhdistukseen ja herkkien pintojen kiillotukseen



- Erittäin perusteellinen hienon kuitukankaan ansiosta
- Nopea kiillotus ilman raitoja
- Poistaa pienet lika- ja pölyhiukkaset antistaattisten ominaisuuksien ansiosta
- Mikrokuituliinan pesu kork. 60 °C:ssa

Saatavilla: Yksittäisenä liinana
Pyyhekoko: 32 x 32 cm

Iho ja kädet



Desinfiointi ja puhdistus Käsien desinfiointiliuos

■ HD 410* käsien desinfiointiliuos

Alkoholipitoinen käsiin hierottava valmiste hygieeniseen ja kirurgiseen desinfiointiin



- Bakterisidinen, tuberkulosidinen, hiivasieniä tuhoava, rajoitetusti virusidinen PLUS (vaipalliset virukset, ml. HBV, HCV, HIV ja koronaviruset, sekä vaipattomat adeno- ja noroviruset)
- Erittäin nopea: Käsien hygieeninen desinfektio 30 sekunnissa / käsien kirurginen desinfektio 90 sekunnissa
- Sisältää ihoa hoitavia ja rasvakerroksen palauttavia ainesosia, erittäin hellävarainen iholle – dermatologisesti testattu.
- Tuoksuton

Vaikuttavat aineet: Alkoholit

Saatavilla: 500 ml, 500 ml Hygocare Plus -laitteeseen, 1 l, 2,5 l, 10 l

Suosituksemme: Valmisteiden yleisautomaatti S 400, L 400, L 1000, Touchless T / XT 400, T / XT 1000, annostelupumput

Käsien puhdistus

■ HD 435 pesuneste

Mieto pesuneste käsiille



- Tukee ihon luonnollista suojausta – pH-arvo vastaa ihon omaa pH-arvoa
- Dermatologisesti testattu

Saatavilla: 500 ml, 1 l, 2,5 l

Suosituksemme: Valmisteiden yleisautomaatti S 400, L 400, L 1000, Touchless T / XT 400, T / XT 1000, annostelupumput

Hoito

■ HD 440 hoitovoide

Hajusteeton hoitovoide rasittuneiden ja herkkien käsien suojaamiseen ja hoitoon



- Imeytyy nopeasti rasvoittamatta
- Tuoksuton
- Väriaineeton

Tuotteen koostumus: HD 440 On öljy-vesi(O/W)-emulsio.

Se sisältää avokadoöljyä ja glyseriiniä.

Saatavilla: 500 ml

Suosituksemme: Yleisvalmisteannostelija S 400, L 400, Touchless T/XT 400, annostelupumppu



Annostelijat

■ Automaattiannostelija Touchless XT

Paristokäyttöinen annostelija käsivalmisteiden hygieeniseen käyttöön käsin koskematta



- Optimaalista käsihygieniaa automaattiannostelijan ansiosta
- Paristokäyttö varustilan näytöllä, pariston vaihdosta muistuttava äänimerkki
- Korkea hygieniataso, kotelo eloksoitua alumiinia
- Autoklaavissa steriloitava pumppu ruostumattomasta teräksestä tai kertakäyttöpumppu

Mitat (LxKxS): T 1000 / T 400: 9,2 x 33,0 x 21,0 cm

Saatavilla: XT 400 500 ml:n pulloon, XT 1000 1 l:n pulloon

Suosituksemme: HD 410, HD 435 500 ml -pullossa tai 1 l -pullossa, HD 440 500 ml-pullossa, pidike, pöytäjalusta, annostelupylväs, kertakäyttöpumput

■ Automaattiannostelija RX

Manuaalinen tai paristokäyttöinen valmisteiden yleisautomaatti käsivalmisteille



- Manuaalinen (RX 5 M, RX 10 M) tai automaattinen (RX 5 T)
- Kotelo ja keräysastia on valmistettu kestävästä valkoisesta muovista
- Pitkäikäiset muovipumput

Mitat (LxKxS): RX 5 M: 10,2 x 27,0 x 14,2 cm, RX 10 M: 33,4 x 18,4 x 21,8 cm, RX 5 T: 27 x 15,7 x 22,6 cm

Saatavilla: RX 5 M ja RX 5 T 500 ml:n pulloon tai RX 10 M 1 l:n pulloon

Suosituksemme: HD 410, HD 435, HD 440 500 ml:n pullossa tai 1 l:n pullossa

■ Automaattiannostelija

Seinälle asennettava yleisautomaatti käsivalmisteille



- Erittäin käyttäjäystävällinen
- Saatavissa lyhyellä (S) tai pitkällä (L) vivulla
- Pitkäikäinen rakenne alumiinia ja ruostumatonta terästä
- Autoklaavissa steriloitava pumppu tai kertakäyttöpumppu

Mitat (LxKxS): S 400/L 400: 8,2 x 24,5 x 8,2 cm, vivun pituus: S: 16 cm,

L: 21,5 cm/L 1000: 9,2 x 29 x 9 cm, vivun pituus: 22,5 cm

Saatavilla: S 400 ja L 400 500 ml:n pulloon, L 1000 1 l:n pulloon

Suosituksemme: HD 410, HD 412 essential, HD 435 500 ml:n pullossa tai 1 l:n pullossa, HD 440 500 ml:n pullossa, kertakäyttöpumput

■ Annostelupylväs valmisteiden yleisautomaatille, kosketukseton

Annostelupylväs tukevalla jalustalla ja ohjekehys käsien desinfiointiliuoksen julisteelle



- Vapaasti asennettava
- Ihanteellinen alueille, joilla valmisteiden annostelulaitteiden kiinnittäminen seinälle ei ole mahdollista

Korkeus: 180 cm

Ovaalinmuotoinen alumiiniprofiili, hopeaeloksoitu: 7 x 3 cm

Teräksinen pohjalevy RAL9006 pulveripäälystetty 42,5 x 50 cm

Alumiininen kääntyvä runko pystysuunnassa DIN A3 (29,7 x 42 cm)



Desinfiointi ja puhdistus Imulaitteet ja suunhuuhtelualtaat

■ Orotol® plus imulaitteiden desinfiointiaine

Vaahoamaton nestetiiviste kaikkien imulaitteiden ja amalgaaminerottimien samanaikaiseen desinfioimiseen, puhdistukseen, hajunpoistoon ja hoitoon



- Bakterisidinen, hiivasieniä tuhoava, rajoitetusti virusidinen (vaipalliset virukset, ml. HBV, HCV, HIV ja koronaviruset) sekä vaipattomat adeno- ja norovirukset
- Irrottaa biofilmiä ja ehkäisee veren ja proteiinien muodostaman sakan syntymistä
- Liuos kontaminoituneita imulaitteistoja varten – takaa varman infektiosuojan
- Tarkastettu yhteensopivuus materiaalien kanssa – johtavien hoitokonevalmistajien suosittelema

Vaikuttavat aineet: Kvaternaariset ammoniumyhdisteet

Saatavilla: 1 l, 2,5 l

Suosituksemme: OroCup, MD 555 cleaner, MD 550

■ Orotol® ultra imulaitteiden desinfiointiaine

Jauhemainen aine kaikkien imulaitteiden ja amalgaaminerottimien samanaikaiseen desinfiointiin, puhdistukseen, hajunpoistoon ja hoitoon



- Bakterisidinen, tuberkulosidinen, hiivasieniä tuhoava, fungisidinen, sporisidinen (Clostridium difficile -bakteeria vastaan), virusidinen (vaipalliset virukset, ml. HBV, HCV, HIV ja koronaviruset, sekä vaipattomat virukset kuten adenovirukset, polyomavirukset SV 40, norovirukset ja poliovirukset)
- Irrottaa biofilmiä ja ehkäisee veren ja proteiinien muodostaman sakan syntymistä
- Pieni käyttöpitoisuus (1 %)
- Tarkastettu yhteensopivuus materiaalien kanssa – johtavien hoitokonevalmistajien suosittelema

Vaikuttavat aineet: Natriumkarbonaatti-peroksohydraatti

Saatavilla: 500 g-pussi

Suosituksemme: OroCup, MD 555 cleaner, MD 550

■ MD 555 cleaner imulaitteiden erikoispuhdistusaine

Kaikkien imulaitteiden ja amalgaaminerottimien vaahoamaton pesutiiviste



- Irrottaa kalkin, profylaksijauheiden ja profylaksi-pearl-tuotteiden kovettumat
- Puhdistaa erinomaisesti kerääntymät ja lietteen
- Tarkastettu yhteensopivuus materiaalien kanssa – johtavien hoitokonevalmistajien suosittelema
- Ihanteellinen yhdistettynä tuotteeseen Orotol® plus

Ainesosat: Orgaaniset ja epäorgaaniset hapot, vaahoamattomat tensidit

Saatavilla: 2,5 l

Suosituksemme: OroCup, Orotol® plus, Orotol® ultra, MD 550

■ MD 550 sylkykupin puhdistusaine

Vaahoamaton valmis käyttöliuos suunhuuhtelualtaiden tehokkaaseen ja täydelliseen puhdistukseen



- Jäämien kuten kalkin, veren ja plakinvärjäysaineiden ongelmattomaan poistamiseen
- Suunhuuhtelualtaiden samanaikainen puhdistus, hajun poistaminen ja hoito
- Ei hankaavia ainesosia – ei naarmuja suunhuuhtelualtaaseen
- Antimikrobinen – tehoaa bakteereihin, Tb-bakteereihin ja hiivasieniin

Vaikuttavat aineet: Alkoholit

Saatavilla: 750 ml

Suosituksemme: Orotol® plus, Orotol® ultra, MD 555 cleaner

■ OroCup-hoitojärjestelmä

Käyttäjäturvallinen, suljettu hoitojärjestelmä imulaitteiden ja amalgaaminerottimien desinfiointiin ja puhdistukseen



- Tuottaa ilma-vesiseoksen imujärjestelmän optimaaliseen huuhteluun ja tehokkaaseen puhdistukseen
- Rationaalista työskentelyä – yksi järjestelmä käyttöliuosten valmistukseen ja läpi-imuun
- Liitäntäadapteri kaikille imuletkuille

Saatavilla: 2 litran hoitojärjestelmä

Suosituksemme: Orotol® plus, Orotol® ultra, MD 555 cleaner



Jäljennökset ja hammastekniset työt

■ MD 530 sementinpoistaja ja proteesien puhdistusaine

Valmis käyttöliuos sementin, hammaskiven, tupakkaläiskien, oksidikerrosten ym. poistamiseen proteeseista, silloista, kruunuista, spaatteista, lasista jne.



- Tehokas puhdistusvaikutus ja happoliukoisten pintojen poistaminen jälkiä jättämättä
- Käyttövalmis, erinomainen materiaalien sietokyky
- Erityisen nopea ja tehokas erikoisreseptin ansiosta
- Sisältää korroosionestoaineita
- Sopii käytettäväksi ultraäänilaitteissa

Ainesosat: Epäorgaaniset hapot, tensidit

Saatavilla: 2,5 l

Suosituksemme: Hygobox

■ MD 535 kipsinpoistoaine

Valmis käyttöliuos kipsin ja alginaattien poistamiseen jäljennöslusikoista ja muista apuvälineistä



- Neutraali erikoispuhdistusaine, erityisen nopea vaikutus
- Erinomainen puhdistusvoima kipsin ja alginaatin täydelliseen poistamiseen
- Aktiiviteetti-indikaattori
- Sopii käytettäväksi ultraäänilaitteissa

Ainesosat: Alkaliset puhdistusosat ja kompleksinmuodostajat

Saatavilla: 2,5 l

Suosituksemme: Hygobox

■ MD 520 jäljennösten desinfiointiaine

Täysin virusidinen käyttöliuos jäljennösten, proteettisten töiden jne. tehokkaaseen ja materiaaliystävälliseen desinfiointiin ja puhdistukseen.



- Bakterisidinen, tuberkulosidinen, hiivasieniä tuhoava, virusidinen (vaipalliset virukset, ml. HBV, HCV, HIV ja koronavirus, sekä vaipattomat adenovirukset, polyomavirukset SV40, norovirukset ja poliovirukset)
- Käyttöalgaatteihin, silikoniin, polyeetterikumiin, hydrokolloideihin, polysulfideihin, jne.
- Kipsimallista entistä tarkempi tehokkaan puhdistusvaikutuksen ansiosta
- Mitoituksen pysyvyyden ja kipsin yhteensopivuuden säilyminen

Vaikuttavat aineet: Kvaternaariset ammoniumyhdisteet, glutardialdehydi

Saatavilla: 2,5 l, 10 l

Suosituksemme: desinfiointirasia, Hygobox, Hygojet

■ MD 520 desinfiointiasia

Astia upotusdesinfointia ja puhdistusta varten MD 520-aineella



- Sisältää enintään 2 jäljennöslusikalle tarkoitetun erikoisvalmisteisen ripustustelineen.
- Kätevällä varattu-näytöllä

Mitat: Korkeus 19 cm, Ø: 11,7 cm

Tilavuus: korkeintaan 1 litra

Laite

■ Hygojet

Jäljennösten ja proteettisten töiden desinfiointi- ja puhdistuslaite



- Suljettu järjestelmä estää risti-infektioita
- Riittoisa käytössä – vain 10 ml MD 520 -ainetta jäljennöstä kohden
- Erittäin tehokas – 6 jäljennöstä 12 minuutin sisällä
- Tarkastettu desinfiointimenetelmä – asiantuntijalausunto

Mitat: (LxKxS): 56 x 34 x 32 cm

Suosituksemme: MD 520

Vaikutusalueet ja käyttö

	desinfointi	puhdistus	VAH-luettelossa	IHO-desinfiointinluettelo	testattu EU-normien mukaan	bakterisidinen	tuberkulosidinen	hiivasieniä tuhoava	fungisidinen	rajoitetusti virusidinen	rajoitetusti virusidinen plus	virusidinen	käyttöpiifisuus / vaikutusaika minuutteina	kestoaika päivissä
Instrumentit														
ID 212 instrumenttien desinfiointiaine	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			2 % / 5 ⁴	7
ID 212 forte Instrumenttien desinfiointiaine	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			2 % / 5 ⁴	7
ID 213 instrumenttien desinfiointiaine	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			2 % / 5 ⁴	14
ID 215 entsyymattinen instrumenttien puhdistusaine	■	■			■	■		■		■			1 % / 2 % / 30 / 15	
ID 220 porien desinfiointiaine	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	100 % / 1 ⁴	7
Pinnat														
FD 300 pintojen desinfiointiaine	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	1 % / 2 % / 15 / 5 ⁴	
FD 312 pintojen desinfiointiaine ¹	■	■	■	■	■	■		■		■	■		1 % / 15 ⁴	
FD 322 pikadesinfiointiaine	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		100 % / 1 ⁴	
FD 333 pikadesinfiointiaine	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		100 % / 1 ⁴	
FD 333 forte pikadesinfiointiaine	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	100 % / 1 ⁴	
FD 366 sensitive herkkien pintojen desinfiointiaine	■	■	■	■	■	■	■	■		■			100 % / 1 ⁴	
FD 312 wet wipes pintojen desinfiointipyhkeet ¹	■	■	■	■	■	■		■		■			käyttövalmis/15 ⁴	
FD 322 premium wipes, pikadesinfiointipyhyhe FD 322 top wipes pikadesinfiointipyhyhe FD 322 wipes pikadesinfiointipyhyhe	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		käyttövalmis/1 ⁴	
FD 333 wipes pikadesinfiointipyhyhe FD 333 top wipes pikadesinfiointipyhyhe	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		käyttövalmis/1 ⁴	
FD 333 forte premium wipes pikadesinfiointipyhyhe FD 333 forte wipes pikadesinfiointipyhyhe	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	käyttövalmis/1 ⁴	
FD 360 keinoahan puhdistus- ja hoitoaine		■											käyttövalmis	
FD 350 desinfiointipyhkeet	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		käyttövalmis/1 ⁴	
FD 366 sensitive wipes FD 366 sensitive top wipes herkkien pintojen desinfiointipyhyhe	■	■	■	■	■	■	■	■		■			käyttövalmis/1 ⁴	
Iho ja kädet														
HD 410 käsien desinfektioneste ^{1,2}	■		■	■	■	■	■	■		■	■		100 % / 0,5 / 1,5 ^{2,4}	
HD 435 pesuneste		■											100 %	
HD 440 hoitovoide													100 %	
Erikoisalueet														
Orotol® plus imulaiteiden desinfiointiaine	■	■	■	■	■	■		■		■			2 % / 5 ⁴	
Orotol® ultra imulaiteiden desinfiointiaine	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1 % / 5 ⁴	
MD 555 cleaner imulaiteiston erikoispuhdistusaine		■											5 % / 30-120	
MD 550 sylkykupin puhdistusaine		■		■	■	■	■	■					100 % ⁴	
MD 520 jäljennösten desinfiointiaine	■	■	■	■	■	■	■	■		■		■	100 % / 5 ^{3,4}	7
MD 530 sementinpoistoaine ja proteesinpuhdistusaine		■											100 % ³	
MD 535 kipsinpoistoaine		■											100 %	

¹ Käytä desinfiointiainetta varovaisesti. Lue aina ennen käyttöä etiketti ja tuotetiedot. ² Hygieeninen käsien desinfiointi / kirurginen käsien desinfiointi. ³ Hygojet-laitteessa. ⁴ bakterisidinen / hiivasieniä tuhoava. Lisätietoja löydät tuotetiedoissa Internetissä osoitteessa www.duerrdental.com