



Yksi järjestelmä, kolme sävyä:
Helppo juokseva ratkaisu
kaikkiin kaviteettiluokkiin



Solventum™ Filtek™ Easy Match Flowable -yhdistelmämuovi

- ✓ Intuitiivinen sävyn valinta
- ✓ Kaikkiin kaviteettiluokkiin
- ✓ Luonnollinen opaakisuus
- ✓ Käytännössä ei ilmakuplia

Helppo ja vaivaton

Solventum™ Filtek™ Easy Match Flowable
-yhdistelmämuovi selkeyttää sävyn valintaa, kun vaihtoehtoja on vain kolme: Bright, Natural ja Warm. Havainnoi ja valitse sävy intuitiivisesti.


Luonnostaan mukautuva opaakkisuus tarkoittaa, että tuote on viisteessä ja inkisaalikärjessä kiillemäisen läpikuultava ja muualla dentiinimäisen opaakkinen ilman blocker-ainetta.

- Käytännössä ilmakuplalon ja valumaton
- Selkeä ja intuitiivinen sävynvalinta sekä etu- että taka-alueen restauraatioon
- Pienempi varastotarve vähentää harvoin käytettyjen sävyjen hukkaa




Indikaatiot

Kerrospaksuus 2 mm

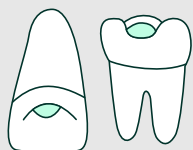


I luokka

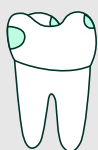

II luokka



III luokka

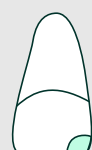

IV luokka



V luokka



Alustäyte



Eriste



Epäsuora
(pienien vaurioiden)
korjaaminen



Korjaus¹



Fissuroiden
pinnoitus


1 Väliaikaisten muovi- ja akryylitöiden korjaaminen

Kaikki indikaatiot ovat luettavissa käyttöohjeista

Luonnollisesti mukautuva opaakkisuus

Tarjoaa kiillemäisen läpikuultavuuden siellä, missä sitä tarvitaan ja dentiinimäisen opaakkisuuden muualla – ilman blocker-ainetta.

Juoksevat tuotteet vertailussa

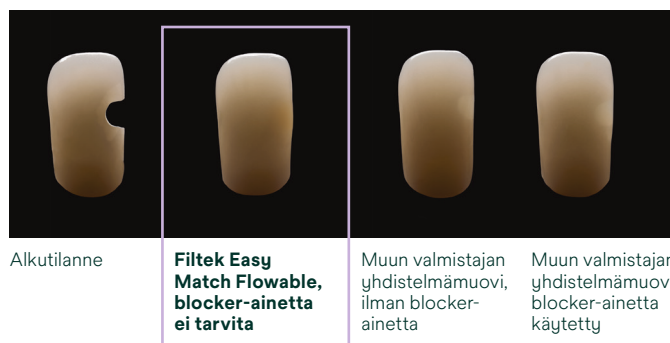


Pastamaiset tuotteet vertailussa



Lähde: Solventumin sisäiset tiedot. Muun valmistajan yhdistelmämuovi #121E04, Muun valmistajan yhdistelmämuovi blocker-aine Flow: #142A35, Solventum™ Filtek™ Easy Match Flowable -yhdistelmämuovi: #10777361.

Lähdeliite: Solventumin sisäiset tiedot. Muun valmistajan yhdistelmämuovi erä #098E53, #002EY8; 3M™ Filtek™ Easy Match -yhdistelmämuovi -erä #9533695, #NE57998.

3M™ Filtek™ Easy Match ja Solventum™ Filtek™ Easy Match Flowable -yhdistelmämuovit osoittivat samaa väriarvon ja paksuuden käyttäytymistä ja peittoavat yksisävyjärjestelmät sekä juoksevien aineiden että pastan osalta.

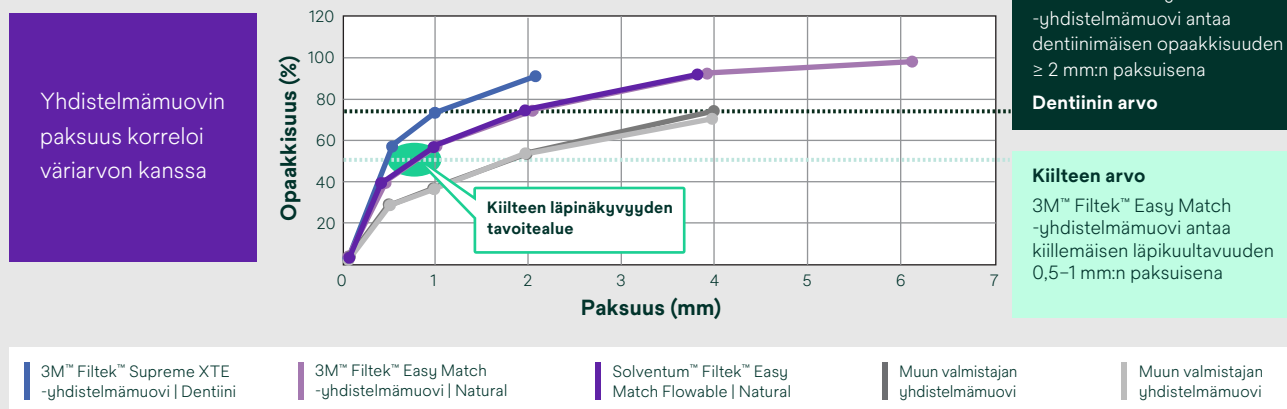

Lähde: Solventumin sisäiset tiedot

Miten se toimii? Luonnollisesti mukautuvan opaakkisuuden avulla.


Toisin kuin jotkut yksisävyjärjestelmät, Filtek Easy Match -yhdistelmämuovi juoksevassa tai pastamuodossa ei kaipaa blocker-ainetta suuontelon tummuuden kompensointiin etualueen täytteissä. Sen luonnollisesti mukautuva opaakkisuus luo kiillemäisen vaikutelman 0,5–1 mm:n paksuisena juuri oikealle alueelle: viisteeseen ja inkisaalikärkeen. Muilla alueilla ≥ 2 mm:n paksuisena se tarjoaa dentiiniä vastaavan opaakkisuuden.

Kaikki yhdistelmämuovit ovat läpikuultavampia, kun niitä levitetään ohuelti. Filtek Easy Match -yhdistelmämuovien luonnollisesti mukautuva opaakkisuus vastaa optimaalisesti sekä dentiinin että kiilteen sävyä, mikä saa sen sulautumaan hampaan rakenteeseen ja tekee lopputuloksesta luonnollisen.

Intuiitiivinen sävyn valinta

Sävykkyyden tai värikylläisyyden määrittely on vain yksi vaihe oikean sävyn löytämisessä. Jopa ”oikean värinen” yhdistelmämuovi voi erottua ympäröivästä hampaasta, jos sen arvo (suhteellinen kirkkaus/tummuus) tai opaakkisuus ei vastaa ympäristöä.

Filtek™ Easy Match -yhdistelmämuovin 3 sävyä kattavat VITA Classical -sävyt ilman blocker-aineen tarvetta.

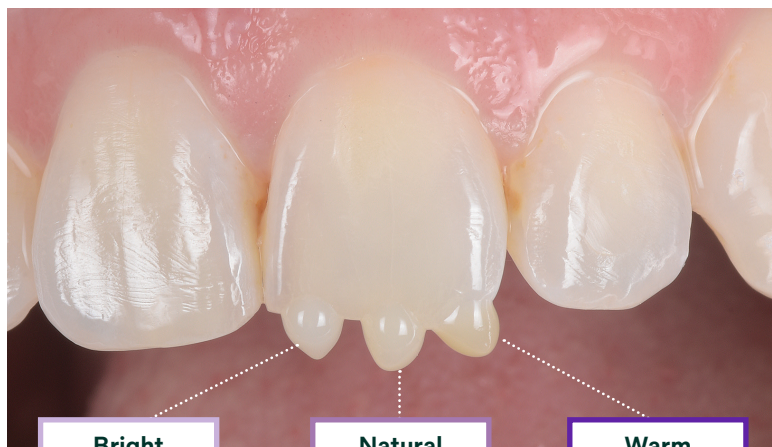

Kuva: hll Brian Baliwas

Edut, joista tulet pitämään molemmissa:

- Nopea, helppo ja intuiitiivinen sävyn valinta
- Luonnollisesti mukautuva opaakkisuus, blocker-ainetta ei tarvita
- Kolmesta sävystä löytyy sopiva useimpien potilaiden hymyyn
- Pienempi varastotarve auttaa vähentämään harvoin käytettyjen sävyjen hukkaa
- Sekä Filtek Easy Match Flowable että Filtek Easy Match -yhdistelmämuovit ovat turvallisia lämmittää^{1,2}

1 Lämmitä kapselit 70 °C:n lämpöön enintään 1 h.

2 Lämmitä juoksevan aineen ruiskut enintään 70 °C:n lämpöön enintään 1 h, jopa 25 kertaa.

Kirkas hymy



Esimerkki **kirkkaasta** hampaan sävystä.



Bright: matala kroma, korkea väriarvo

Luonnollinen hymy



Esimerkki **luonnollisesta** hampaan sävystä.



Natural: Tasapainoinen, keskitason kroma ja väriarvo

Lämmin hymy



Esimerkki **lämpimästä** hampaan sävystä.



Warm: Korkea kroma ja matala väriarvo

Käytännössä ilmakuplalon ja valumaton

Monissa juoksevilla yhdistelmämuoveissa voi muodostua ilmakuplia annostelussa. Filtek Easy Match Flowable -yhdistelmämuovi on suunniteltu välttämään ne, ja se levittyy jokseenkin kuplattomasti ja valumatta, joten se on helpompi hallita.

Se toimii, koska sisäinen rakenne minimoi turbulenssin ja ilmataskujen muodostumisen kahdella tavalla:

1. Ruiskun muoto

Männän erityismuotoiltu kanava sallii ilman poistua ruiskusta täyttöprosessin aikana Solventumin tuotantolaitoksissa. Tämän ansiosta ilmaa ei jää ruiskun, mistä voisi seurata kuplia ja ylivuotoa.



2. Kärjen muotoilu

Kärjen sileä ja kaventuva sisäseinä noudattaa ruiskun kaventuva kulmaa, joten materiaali pääsee virtaamaan uusitun kärjen läpi ja ilmataskuja ei jää.

vs.

Tavanomaisten juoksevien yhdistelmämuoviruiskujen kärki voi olla kulmikas, jolloin ilmaa voi jäädä pastaan.

Solventumin ruiskun kärjen sileä sisäpinta ehkäisee ilmataskujen muodostumista.

Tokuyama Estelite Universal Flow Super Low	Tokuyama OMNICHROMA FLOW
VOCO GrandioSO Heavy Flow	Ivoclar Tetric EvoFlow®
Dentsply Sirona TPH Spectra® ST Flow	Kerr Herculite™ Ultra Flow

Solventum™ Filtek™ Easy Match Flowable -yhdistelmämuovi

Lähde: Solventumin sisäiset tiedot. Solventum™ Filtek™ Easy Match Flowable -yhdistelmämuovi, erät #11529040, #11475951 ja #1096960. Tokuyama ESTELITE UNIVERSAL FLOW Super Low, erät #088E44 ja #077E94; Tokuyama OMNICHROMA FLOW, erät #121E04 ja #077E94; VOCO GrandioSO Heavy Flow erät #2445600 ja #2449208; Ivoclar Tetric EvoFlow® erät #N010227, # Z07CRP ja #Z07KP7; Dentsply Sirona TPH Spectra® ST flow erät #2410000535 ja #2411000095; Kerr Herculite™ Ultra Flow erä #A193331.

Solventum™ Filtek™ Easy Match Flowable -yhdistelmämuovi



Tuotekoodi	Kuvaus
Bright	
6225B	(2) ruiskua, 2 g/kpl (1) 20 annostelukärkeä
Natural	
6225N	(2) ruiskua, 2 g/kpl (1) 20 annostelukärkeä
Warm	
6225W	(2) ruiskua, 2 g/kpl (1) 20 annostelukärkeä
Aloituspakkaus	
6225K	(3) ruiskua, 2 g/kpl: 1 kutakin sävyä: Bright, Natural ja Warm (2) 20 annostelukärkeä



- ✓ Nopea
- ✓ Helppo
- ✓ Kannettava

3M™ Filtek™ Easy Match -yhdistelmämuovi



Tuotekoodi	Kuvaus
Bright	
6210B	(20) 0,2 g:n kapselia
6220B	(1) 4 g:n ruisku
Natural	
6210N	(20) 0,2 g:n kapselia
6220N	(1) 4 g:n ruisku
Warm	
6210W	(20) 0,2 g:n kapselia
6220W	(1) 4 g:n ruisku
Aloituspakkaus	
6210K	(60) 0,2 g:n kapselia: 20 kutakin sävyä: Bright, Natural ja Warm
6220K	(3) ruiskua, 4 g/kpl: 1 kutakin sävyä: Bright, Natural ja Warm

Uusi

Sekä Filtek Easy Match Flowable ja Filtek Easy Match -yhdistelmämuovit voidaan lämmittää^{1,2} ja ne sopivat yhteen **Solventum™ Filtek™ Yhdistelmämuovilämmittimen kanssa**

6520K	Sisältää lämmittimen ja lämmitysalustan, yhdistelmämuovitelineen ja silikonisuojaan kiinteän USB-C-johdon, virtapistokkeen, pistorasiasovittimen ja pikaoppaan
-------	--



Solventum Finland Oy
Dental Solutions
Keilaniementie 1
02150 Espoo

- 1 Lämmitä kapselit 70 °C:n lämpöön enintään 1 h.
- 2 Lämmitä juoksevan aineen ruiskut enintään 70 °C:n lämpöön enintään 1 h, jopa 25 kertaa.

© Solventum 2025. Solventum, S-logo ja Filtek ovat Solventumin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. 3M ja 3M-logo ovat 3M:n tavaramerkkejä. Muut mainitut kauppanimet ovat omistajayhtiöidensä palvelumerkkejä tai tavaramerkkejä. OMG2033955.