



Q



Hammashoito-
yksikkö, joka
kestää koko
hammaslääkärin
uran ajan.

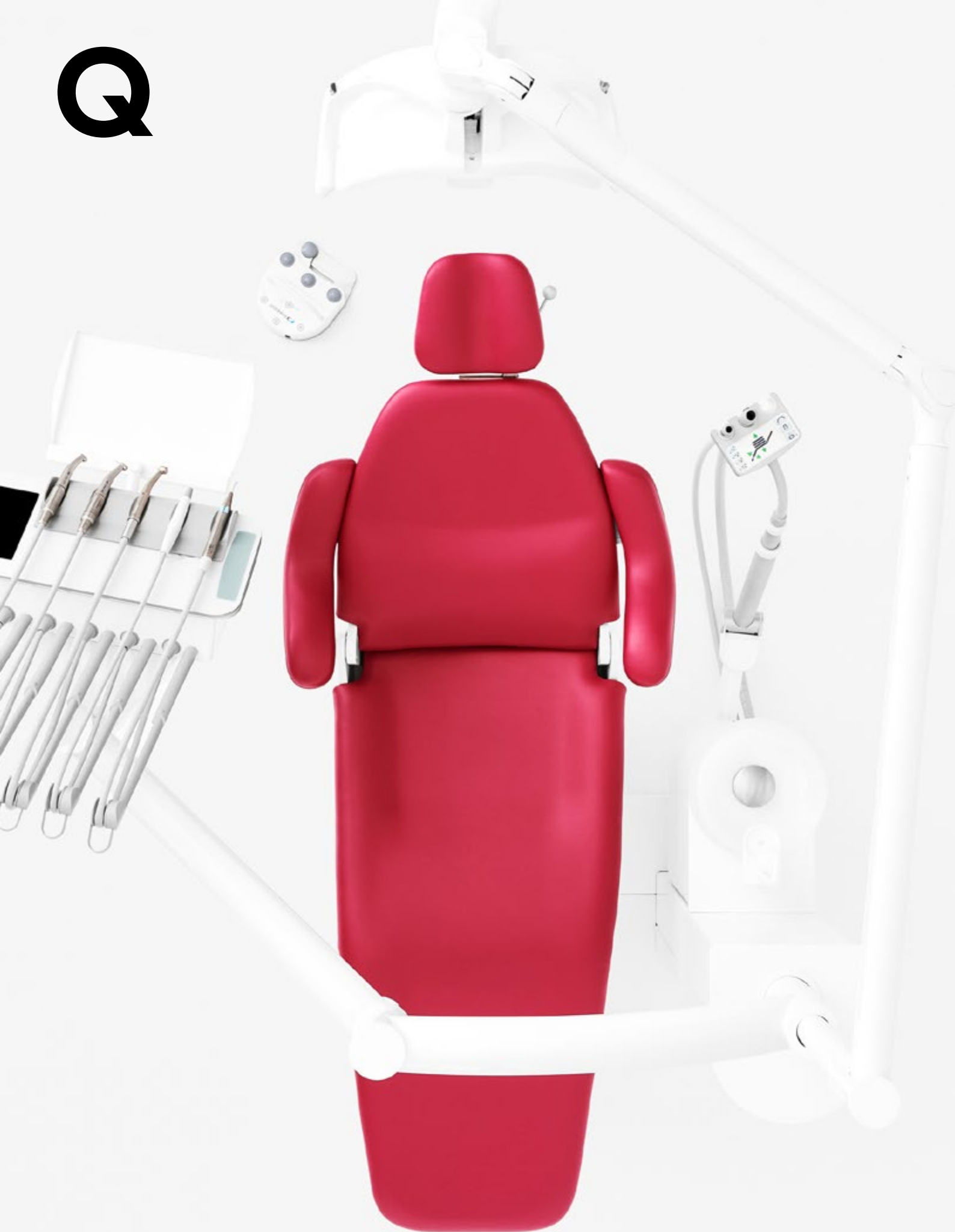

Uudelleenajateltua hammashoitoa

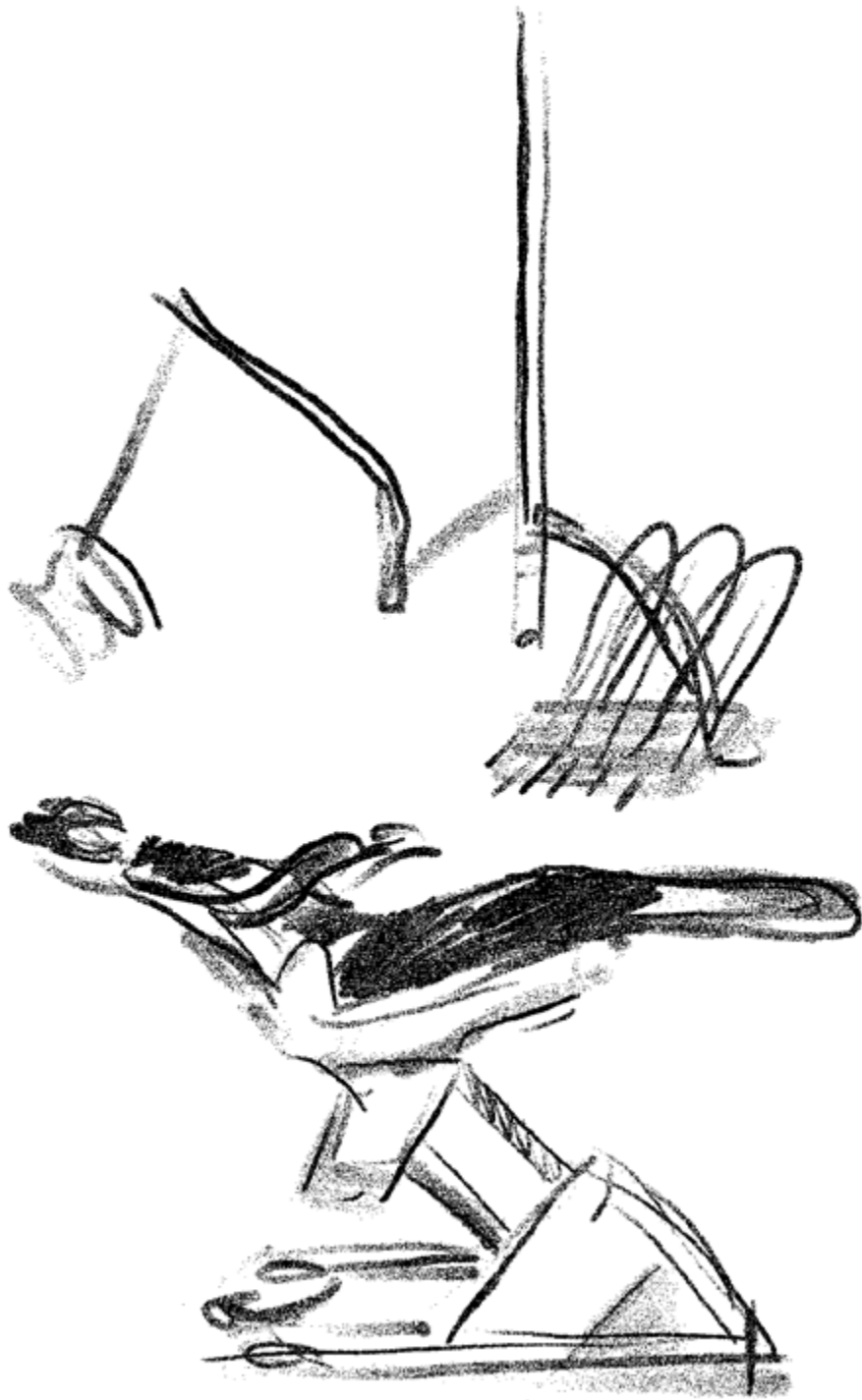

Finndent on suomalainen yritys, joka on kehittänyt innovatiivisia hammashoidon ratkaisuja jo yli neljän vuosikymmenen ajan. Suunnittelemme, kehitämme ja kokoamme korkealaatuisia hammashoitoyksiköitä monenlaisille asiakkaille – yksityisistä hammaslääkäreistä hammasklinikkaketjuihin, sairaaloihin ja oppilaitoksiin.

Kestävä kehitys on olennainen osa yrityksemme arvoja, ja suunta, johon olemme menossa, toimii esimerkkinä muille. Tavoitteemme ei ole ainoastaan olla täysin hiilineutraali yritys vuoteen 2025 mennessä, vaan myös tarjota paikallisesti tuotettuja, ainutlaatuisia ja eettisiä tuotteita, jotka on suunniteltu kestämaan hammaslääketieteen ammattilaisen koko uran ajan.

Kaikki hammashoitoyksikkömme valmistetaan ja kootaan käsin Pohjoismaissa, ja kaikki komponentit sekä lisävarusteet hankitaan luotettavilta toimitusketjun kumppaneilta. Paikallinen tuotanto mahdollistaa tuotteidemme alkuperän tarkkailun ja selkeän kokonaiskuvan. Läpinäkyvä tuotantoketju on tärkeä, jotta voidaan varmistaa paikallisten ympäristöstandardien ja -määräysten noudattaminen. **Finndent haluaa kantaa sosiaalisen ja ekologisen vastuunsa tuottamalla yksikkönsä mahdollisimman eettisesti.**

Missiomme on tarjota asiakkaillemme hammashoitoyksiköitä, jotka kestävät koko ammatillisen uran ajan. Jokainen valmistamamme yksikkö on ainutlaatuinen ja täysin räätälöitävissä, jotta yksikään asiakkaamme ei joudu tekemään kompromisseja tarpeidensa suhteen. Finndent ottaa askeleen kohti kiertotalouteen perustuvaa teknistä kiertoa: haluamme, että tuotteemme ovat korjattavissa, uudelleenkäytettävissä ja kierrätettävissä. Siksi **olemme suunnitelleet yksikkömme aidosti modulaarisiksi – osat voidaan irrottaa, korjata ja vaihtaa.** Toinen tapa, jolla varmistamme yksiköidemme pitkäikäisyyden, on päivitettävyys. Kaikki yksikkömme voidaan päivittää kehittyneempään malliin uusimmalla teknologialla ja ohjelmistolla.

Näin jokainen Finndent-yksikkö on suunniteltu pysymään ajan tasalla koko elinkaarensa ajan.

Pohjoismainen muotoilu keskittyy toiminnallisuuteen, mikä näkyy kauniina, selkeinä muotoina, minimalistisina siluetteina ja pitkäikäisten, laadukkaiden materiaalien käytössä. Pohjoismainen muotoiluideologia tuottaa esineitä, jotka ovat hyvin tehtyjä, aitoja ja ajattomia luonnostaan. Me Finndentillä keskitymme antamaan asiakkaillemme vapauden valita hammashoitoyksikkönsä ominaisuudet ja tarjoamaan heille huolellisesti suunnitellun ja valmistetun ratkaisun massatuotetun esineen sijaan. Meille on tärkeää välittää arvomme muotoilumme kautta.

Finndentin hammashoitoyksiköt on suunnattu vastuullisille hammaslääketieteen ammattilaisille, jotka haluavat investoida tulevaisuuteen.

Q-tuoteperhe

Esittelemme ylpeinä uuden Q-tuoteperheen. Vuosien tutkimus ja kehitystyö ovat johtaneet vaikuttavan modulaarisen hammashoitoyksikköjärjestelmän luomiseen, jossa kauniisti muotoillut tuotteet yhdistyvät edistyneimpään teknologiaan. Lisäksi yrityksemme on ottanut merkittäviä askeleita ilmastonmuutoksen torjumiseksi, ja tulevaisuuden tavoitteena on tehdä Q-yksiköstä maailman ensimmäinen hiilineutraali hammashoitoyksikkö.

Q-yksiköt on suunniteltu ja valmistettu kestäämään hammaslääketieteen ammattilaisen koko uran ajan: yksikkö koostuu pitkäikäisistä metalliosista, ja modulaarinen rakenne mahdollistaa sen päivittämisen uusimmalla teknologialla vuosien ajan asennuksen jälkeen. Tällä hetkellä Q-tuoteperheeseen kuuluu kolme mallia: Q2, Q8 ja Q10. Jokainen myymämme yksikkö on täysin räätälöity asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan ja koottu käsin parhaan mahdollisen laadun varmistamiseksi.

Uskomme, että Q on
tulevaisuuden
hammashoitoyksikkö:
modulaarinen, mukautuva ja
päivitettävä, minimalistisella
muotoilulla, joka säilyy
ajattomana vuosien ajan.



Kestävä kehitys

Ilmastonmuutoksen torjuminen on olennainen osa yrityksemme toimintaperiaatteita. Finndent on sitoutunut tekemään konkreettisia tekoja paremman tulevaisuuden puolesta siirtymällä 100 % uusiutuvaan energiaan ja tavoittelemalla hiilineutraaliutta vuoteen 2025 mennessä.

Kehitämme jatkuvasti uusia liiketoimintamalleja kiertotalouden periaatteiden pohjalta: uudet Q-yksikkömme on suunniteltu modulaarisiksi, korjattaviksi ja päivitettäviksi, jotta ne pysyisivät käytössä mahdollisimman pitkään. Kestävä kehitys tarkoittaa meille kestävää laatua ja älykästä muotoilua, joka mahdollistaa vähäisemmän kulutuksen. Uudelleenajattelua hammashoidossa tarkoittaa palveluiden laajentamista pelkän uuden yksikön myynnin sijaan. Oikealla huollolla, korjauksilla ja päivityksillä hammashoitoyksikkö voi kestää koko hammaslääkärin uran ajan.

Vanhoja hammashoitoyksiköitä ei tulisi koskaan heittää pois. Otamme mielellämme vanhat yksikkömme takaisin uusiin käyttötarkoituksiin. Tuotteidemme laadun ansiosta jopa vanhat yksiköt voidaan korjata ja huoltaa toimimaan täydellisesti uudelleen. Tällä tavoin olemme voineet lahjoittaa useita kunnostettuja yksiköitä järjestöille tai myydä niitä etuhintaan uudelleenkäyttöön.

Kun hammashoitoyksikkö on todella palvellut pitkän elinkaarensa, kaikki osat – lukuun ottamatta pientä osaa elektroniikasta – kierrätetään uudelleenkäyttöä varten. Tuotannossamme pyrimme jatkuvasti resurssien tehokkaampaan käyttöön: vähemmän jätettä, kierrätettävien materiaalien käyttöä ja tuotteiden pakkausmateriaalien minimointia.



Finndent tekee
konkreettisia tekoja
ilmastonmuutoksen
torjumiseksi.

Q2



Q8


Q8 on tehokas hammashoitoyksikkö, jossa yhdistyvät kompakti muotoilu ja rajattomat räätälöintimahdollisuudet. Jokainen yksityiskohta tässä yksikössä on huolellisesti suunniteltu mahdollistamaan mahdollisimman sujuva työnkulku vaativille hammaslääkäreille. iQ-kosketusnäyttö tarjoaa maksimaalisen käyttömukavuuden sekä oikea- että vasenkätisille ammattilaisille. Kuten kaikki Q-yksiköt, myös Q8 voidaan asentaa joko lattiaan tai kattoon, ja se on myöhemmin päivitettävissä kehittyneempään malliin.

Q8 – osaamisalueet

Perushammashoito
Parodontologia
Endodontia
Akuutti päivystyshoito
Eriyishammashoito
Suukirurgia
Lasten suukirurgia
Oikomishoito
Korjaava hammashoito
Suuhygieniä
Ennaltaehkäisevä hammashoito
Implantologia



Q8

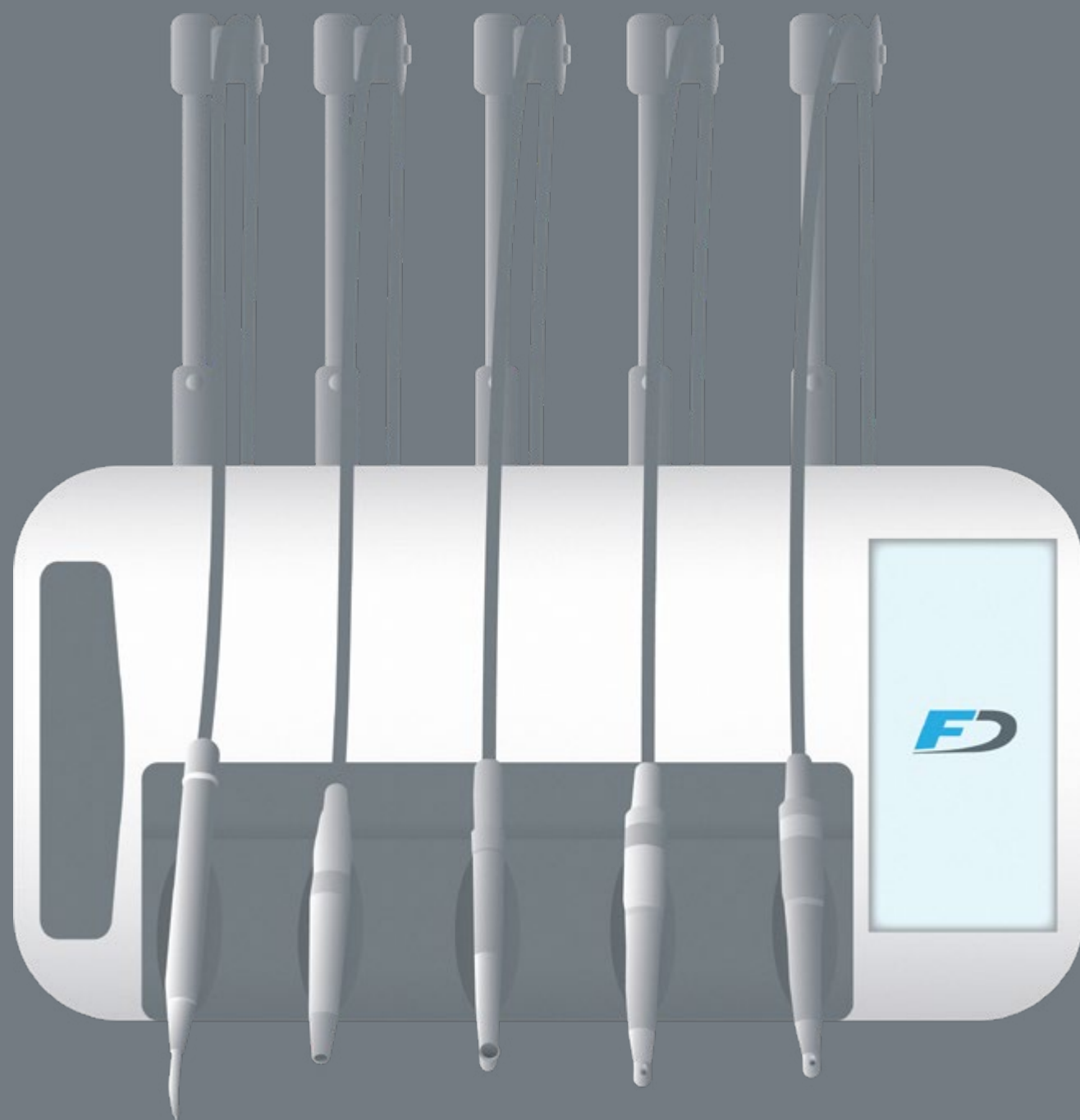

Ominaisuudet

- 7" iQ kosketusnäyttö
- Kestävä lasinen instrumenttisilta
- 5 instrumenttipaikkaa vakiona
- Q-Quick-liittimet
- Ohjelmoitava lasin täyttö ja sylkykupin huuhtelu
- 3-paikkainen imupideke ohjauspainikepaneelilla
- USB plug-and-play liitäntä laitteille
- FARO LED valaisin Maia/Eva/Theia
- FD-5000Q hoitotuoli
- Q10 päivitysmahdollisuus

Lisävarusteet

- Kirurginen tai implanttimoottori
- Kääntyvä sylkykuppi
- Steriilivesijärjestelmä pumpulla
- Kaksoisinstrumenttitarjotin
- Pullojärjestelmä
- Automaattinen imujärjestelmän huuhtelu
- Ohjelmoitava lasin täyttö ja sylkykupin huuhtelu
- USB plug-and-play liitäntä laitteille

Takuu ja huolto

- 5+1 vuoden takuu
- 2 vuoden huoltopaketti

Materiaalilla on merkitystä

Hammashoitoyksikön on kestävä vuosien intensiivinen kliininen käyttö sekä jatkuva altistus vahvoille desinfointiaineille ja liuoksille. Siksi on tärkeää, että yksikkö on valmistettu kestävästä ja korkealaatuisista materiaaleista.

Olemme suunnitelleet koko Q-yksikön metallista, jotta sen ydin olisi mahdollisimman vahva ja pitkäikäinen. Tämä on olennaista, jotta yksikkö kestää vuosien ajan päivityksiä ja uudelleenkäyttöä.

Metalli ei ole ainoastaan muovia tukevampi materiaali – se myös tekee yksikön ulkonäöstä yhtenäisemmän, sillä maalipinta levittyy tasaisesti.

Hammashoitoyksiköiden rakentaminen metallista mahdollistaa pitkäikäisten ja kestävien laitteiden valmistamisen, jotka näyttävät samalla tyylikkäiltä ja ajattomilta.




Jalkakytkin

Q-yksikön jalkakytkin on tukeva mutta kompakti laite, joka on valmistettu paksusta metallista ja suunniteltu kestävänsä pitkään. Se vie vain vähän lattiatilaa ja on helposti saavutettavissa. Käytettäessä jalkapoljinta huomaat, kuinka se pysyy tukevasti paikallaan, mikä takaa ergonomisen työasennon koko työpäivän ajan. Tarvittaessa poljin on myös helposti huollettavissa.

On tärkeää, että yksikön, tuolin ja instrumenttien toiminnot ovat tarkasti ja nopeasti hallittavissa – ja että tämä hallinta säilyy muuttumattomana ajan myötä. Tavoitteenamme on tarjota ajaton ja modulaarinen teknologia, joka vastaa tarpeisiisi myös tulevaisuudessa.

Jalkakytkin liitetään joko yksikön tai tuolin jalustaan, ja sen avulla voidaan säätää kaikkia instrumentteja, hoitovalaisinta ja potilastuolia täysin käsin koskematta. Jalkakäyttö voidaan myös säilyttää sille tarkoitetussa paikassa potilastuolin alla, kun hoituhuoneen lattiaa puhdistetaan.

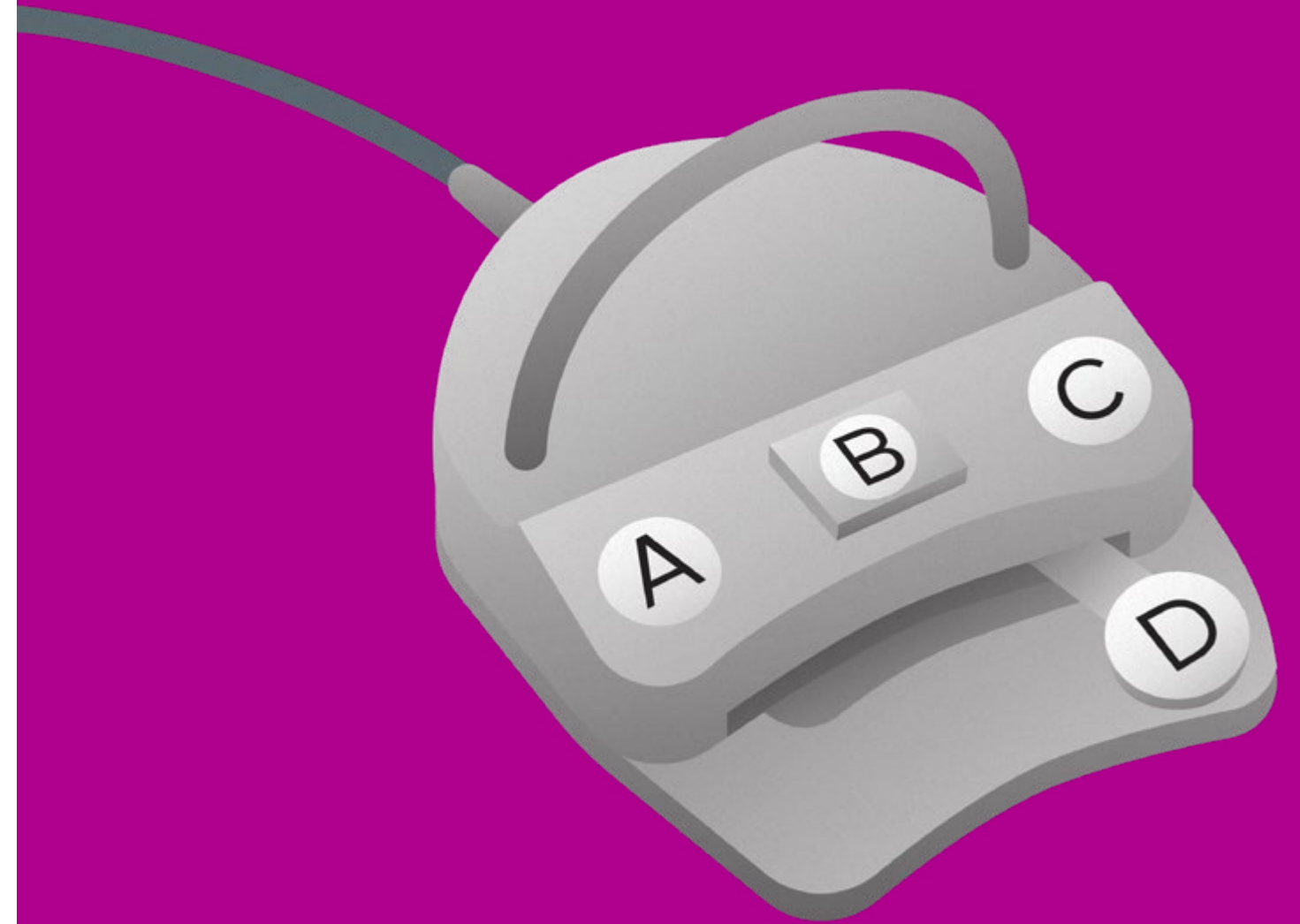

Q-yksikön jalkakytkin on suunniteltu mukautumaan erilaisiin työskentelytyyleihin ja toimintojen yhdistelmiin. Kysy paikalliselta jälleenmyyjältäsi, kuinka jalkakytkin voidaan räätälöidä juuri sinun asetustesi mukaan.

Instrumentit



Ultraääni

Ultraäänilaitteissamme on automaattinen tehonsäätö ja tarkasti hallitut värähtelyt, jotka tuovat jokaisen hoitotoimenpiteen tueksi enemmän kudossäästävyyttä, tehokkuutta ja potilasmukavuutta. Laitteet soveltuvat kaikkiin käyttötarkoituksiin — hammaskivenpoistoon, endodontiaan, parodontologiaan sekä korjaaviin toimenpiteisiin. Ne mahdollistavat hellävaraisen hoidon, jossa saavutetaan tasainen pinnankarheus ja minimoidaan hampaan pinnan kuluminen. Kaikki tarjoamamme ultraäänilaitemallit ovat saatavilla myös LED-valolla varustettuna.



Valokovettajat

Valokovettajat ovat tärkeä työkalu hammaslääketieteen ammattilaisille. Ne soveltuvat monien valolla kovettavien hammashoitomateriaalien kovettamiseen. Tarjoamme useita erinomaisia vaihtoehtoja, jotka ovat turvallisia, tehokkaita ja tekevät kovetustoimenpiteistä miellyttäviä.



Intraoraalikamerat

Intraoraalikameravaihtoehtomme tarjoavat korkealaatuisen kuvan ja laajan näkymän taka-alueelle. Kameran pyöristetty muoto ja ohut kärki tekevät siitä mukavamman käyttää suussa.



Ruiskut

Tarjoamme kahta erilaista ruiskuvaihtoehtoa: 3-toimiruisku: kylmä ilma, kylmä vesi ja suihkutoiminnot. 6-toimiruisku: edellä mainitut toiminnot sekä lämmin ilma, lämmin vesi ja lämmin suihku



Turbiinit

Kaikki ilmaturbiinivaihtoehdot ovat yhteensopivia Q-instrumenttisillan kanssa, joten voit vapaasti valita haluamasi mallin ja merkin.

Älykäs ja vaihdettava

Q-yksikön instrumenttisilta on suunniteltu viidelle instrumenttipaikalle, joissa on pikaliittimet vakiona. Tämä älykäs teknologia mahdollistaa instrumenttien paikkojen vaihtamisen keskeytyksettä, sillä yksikkö tunnistaa automaattisesti uuden kokoonpanon. Erikoistuneet, harvemmin käytetyt instrumentit voidaan säilyttää erillään ja tarvittaessa liittää takaisin siltaan välittömästi. Q-yksikkö hoitaa loput.

Aidosti molempikätinen

On tavallista, että sekä oikea- että vasenkätiset hammaslääkärit työskentelevät samoilla yksiköillä. Monet Finndentin kokoonpanoista ovat luonnostaan molempikätisiä. Halusimme kuitenkin, että Q-yksikkö vastaa hammasalan ammattilaisten ergonomisiin tarpeisiin entistä paremmin. Pikaliittimien ansiosta koko instrumenttisarja voidaan helposti mukauttaa kunkin hammaslääkärin yksilöllisiin tarpeisiin.



Edistynyt integraatio

Pikaliittimien ja vaihdettavien instrumenttien ansiosta voit käyttää yksikössäsi enemmän kuin vain viittä instrumenttia.

Erikoisinstrumentit voidaan asentaa vain tarvittaessa ja jakaa useiden huoneiden ja yksiköiden kesken, mikä säästää sekä rahaa että tilaa. Tällainen edistynyt instrumenttien integrointi vähentää pöytätason instrumenttien määrää ja auttaa pitämään työskentelyalueesi siistinä. Työskentelyalue pysyy hygieenisenä, järjestelmällisenä ja ammattimaisena.



Mikromoottorit



Perus-harjaton

Perus-harjaton mikromoottori on kevyt ja tehokas moottori, joka soveltuu yleishammashoittoon. Moottorin kierrosnopeus on jopa 40 000 rpm.



Endodontia

Endo-mikromoottori on harjaton moottori, jossa on hall-anturit, mikä tekee siitä sopivan sekä yleishammashoittoon että endodontiaan. Nopeusalue 80 rpm - 40 000 rpm



Kirurgia ja implantologia

Harjaton moottori, jossa on hall-anturit, soveltuu sekä implantologiaan että kirurgisiin toimenpiteisiin. Saatavilla LED-valolla tai ilman.




Edistyksellinen sinivaloteknologia

Mikromoottoreihin, käsi-instrumentteihin ja ultraäänikäsikappaleisiin on mahdollista saada kaksois-LED-valot: valkoinen ja sininen. Sinisen valon spektri auttaa havaitsemaan materiaalit, joiden fluoresenssi poikkeaa hampaan rakenteesta, mikä parantaa täsmällisyyttä esimerkiksi paikka-aineiden poistossa. Teknologia on kehitetty vähentämään terveiden hammasrakenteiden tarpeetonta vaurioitumista. Valitsemalla oikeat mallit voit hyödyntää uusia mahdollisuuksia hammasyksikkösi instrumenteilla.

Valaisimet

Toimittamissamme hammashoidon valaisimissa on integroitu valaistusjärjestelmä, joka tekee siirtymisen eri työalueiden välillä helpoksi ja miellyttäväksi vähentäen silmien rasitusta ja väsymystä. Valaisimet on suunnitellut Faro, huomioiden tarkasti sekä hammaslääkärin että potilaan näkökulman. Kehittynyt teknologia ja tyylikäs muotoilu tekevät näistä hammashoitovalaisimista täydellisen yhdistelmän toiminnallisuutta ja estetiikkaa.

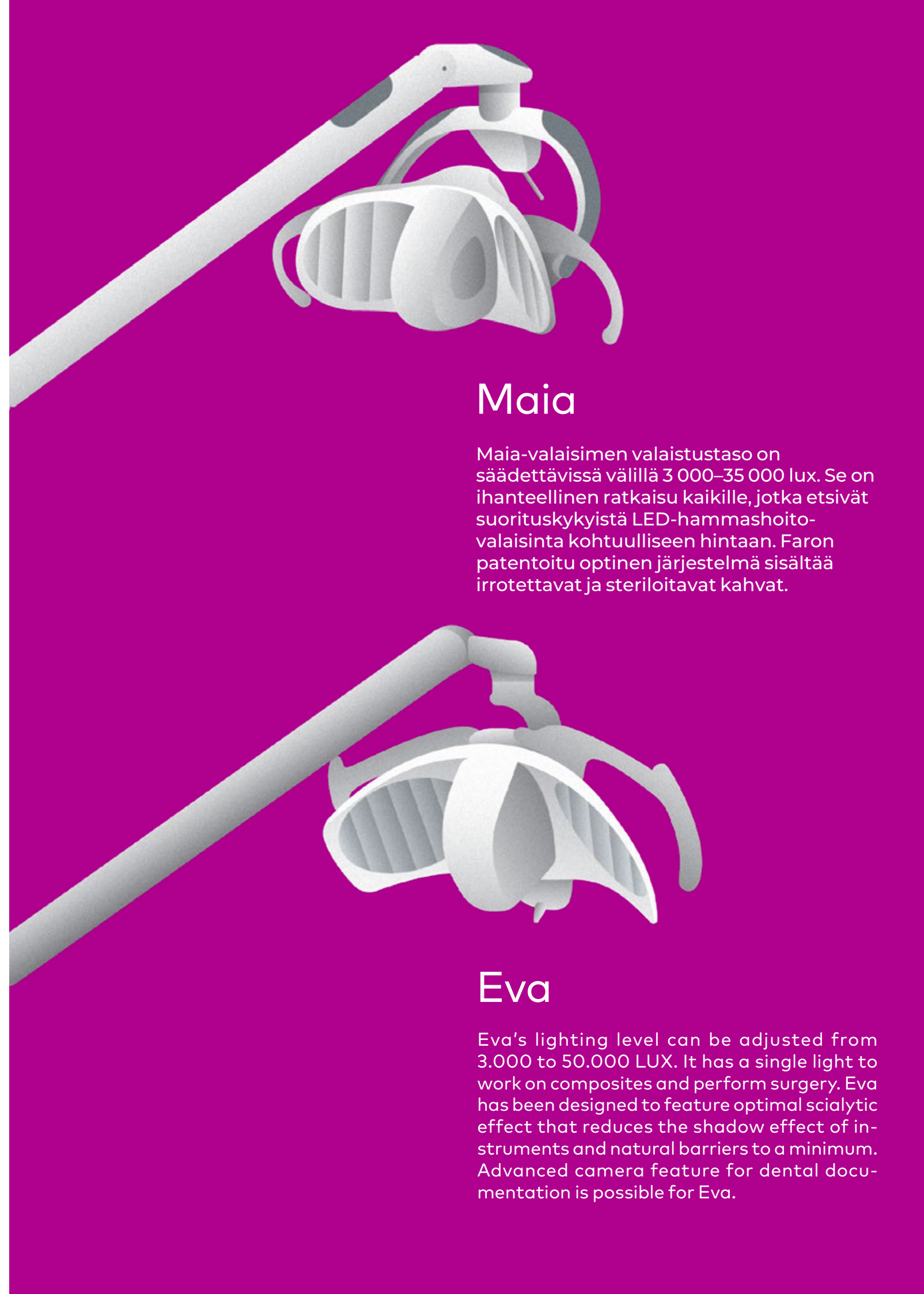

Maia

Maia-valaisimen valaistustaso on säädettävissä välillä 3 000–35 000 lux. Se on ihanteellinen ratkaisu kaikille, jotka etsivät suorituskkyistä LED-hammashoitovalaisinta kohtuulliseen hintaan. Faron patentoitu optinen järjestelmä sisältää irrotettavat ja steriloitavat kahvat.

Eva

Eva's lighting level can be adjusted from 3.000 to 50.000 LUX. It has a single light to work on composites and perform surgery. Eva has been designed to feature optimal scialytic effect that reduces the shadow effect of instruments and natural barriers to a minimum. Advanced camera feature for dental documentation is possible for Eva.


Edistynyt kameratoiminto

Edistynyt kameratoiminto on täydellinen ratkaisu päivittäiseen hammashoidon dokumentointiin sekä vaivattomaan viestintään kollegoiden, potilaiden ja opiskelijoiden kanssa. Se koostuu korkearesoluutioisesta kamerasta, joka on integroitu hammashoitovalaisimeen – tehden siitä heti käyttövalmiin, täysin vakaan ja valmiin jokaiseen toimenpiteeseen.

- Välitön handsfree-dokumentointi ilman hoidon keskeytystä
- Konkreettinen tapausten visualisointi ja hoitosuunnitelmien esittäminen potilaille
- Erinomainen työkalu hoitojen jakamiseen sähköpostitse tai sosiaalisessa mediassa
- Erinomainen työkalu opetuskäyttöön
- Hygieeninen, ei-invasiivinen kamera – helppo desinfioida
- 2–4 uutta hoidon perustelua potilaskohtaisesti
- Turvaa ja varmuutta mahdollisiin vastuukysymyksiin
- Nopea ja vaivaton hammashoidon dokumentointi



Integroitu kamera

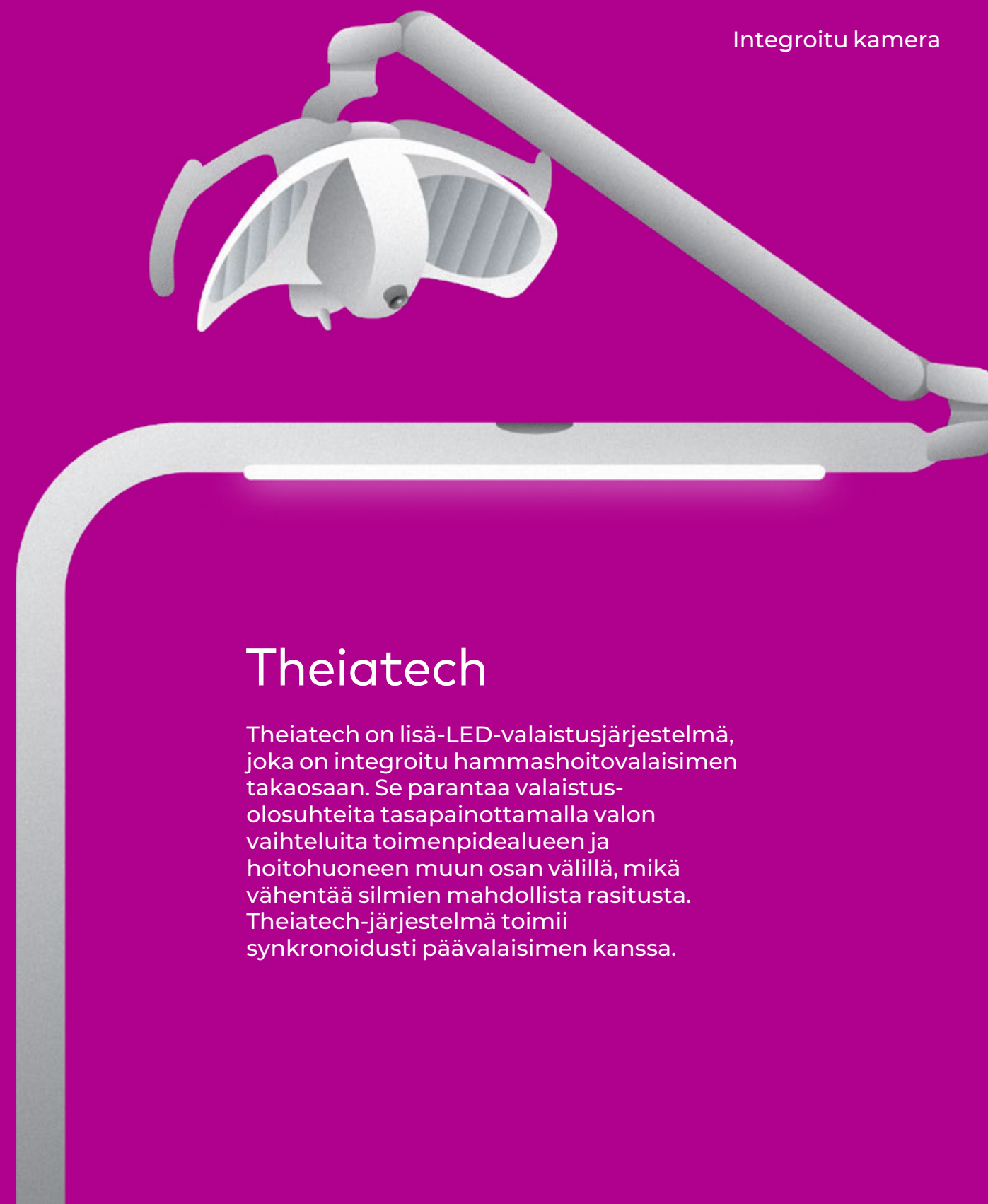

Theiotech

Theiotech on lisä-LED-valaistusjärjestelmä, joka on integroitu hammashoitovalaisimen takaosaan. Se parantaa valaistusolosuhteita tasapainottamalla valon vaihteluita toimenpidealueen ja hoituhuoneen muun osan välillä, mikä vähentää silmien mahdollista rasitusta. Theiotech-järjestelmä toimii synkronoidusti päävalaisimen kanssa.

Kattokiinnitteinen yksikkö

Kattoon asennettava hammashoitoyksikkö on yksi edistyneimmistä ratkaisuista, joita tarjoamme asiakkaillemme. Yksikön asentaminen kattoon ei ainoastaan näytä tyylikkäältä ja futuristiselta, vaan se säästää automaattisesti tilaa, jättäen enemmän huonealaa varsinaiselle hoidolle ja mukavalle työskentelylle. Lisäksi puhdistettavia pintoja on vähemmän.

Kompakti kattoyksikkö on erinomainen ratkaisu pieniin tiloihin, jaettuihin huoneisiin sekä molempikätiseen käyttöön. Kattoyksikkö voidaan asentaa kaikenlaisiin kattoihin (betoni, tiili jne.) ja sen asennusaika on sama kuin tavallisella yksiköllä. Ilma- ja vesijärjestelmät on helppo asentaa Finndent-vesipullotekniikan avulla. Kattoyksikkö on huolellisen suunnittelun ja ammattitaidon tuote, joka nostaa klinikkasi tilaratkaisut uudelle tasolle.

Kattoon asennettava
hammashoitoyksikkö on yksi
edistyneimmistä ratkaisuista tilan
tehokkaaseen hyödyntämiseen ja
dynaamisempaan työskentelyyn.



Hygienia

Q-hammashoitoyksikkö on suunniteltu huolellisesti hygieniavaatimukset huomioiden. Yksikön pinnassa on mahdollisimman vähän pieniä koloja ja rakoja, joihin taudinaiheuttajat voisivat jäädä. Tämän ansiosta Q-yksikön muotoilu mahdollistaa tehokkaan puhdistuksen, jättäen enemmän aikaa varsinaiselle hoidolle.

Q-yksiköt on varustettu automaattisella instrumenttien puhdistuksella, joka on helposti käytettävissä ja varmistaa yksikön puhtauden ja toimivuuden. Valinnainen automaattinen imuletkujen puhdistus huolehtii siitä, että imuletkut puhdistuvat napin painalluksella.

Hygieniasyistä on suositeltavaa minimoida oheislaitteiden ja tavaroiden määrä hoituhuoneessa. Mitä vähemmän esineitä on pöytätasolla ja yksikön ympärillä, sitä vähemmän aikaa kuluu niiden puhdistamiseen. Instrumenttien edistynyt integrointi varmistaa, että suurin osa tarvittavista toiminnoista on jo valmiiksi integroitu hammashoitoyksikköön.

Ristikkäiskontaminaation mahdollisuuden minimointi hammasklinikalla on meille ensisijainen tavoite, ja siksi haluamme tehdä hygieniatoimenpiteistä mahdollisimman vaivattomia hammasalan ammattilaisille.



Instrumenttien puhdistusteline

Instrumenttien puhdistusteline on joustava ratkaisu, joka toimii joko tarjottimella tai sylkykupin yhteydessä. Se on helppokäyttöinen ja intuitiivinen, ja puhdistaa kaikki tarvittavat instrumentit samalla kun voit keskittyä kliniseen työhön. Telineen voi asettaa paikoilleen sekunneissa ja siirtää pois työalueelta yhtä nopeasti.

Kaikki puhdistustelineen materiaalit on valittu huolellisesti, ja ne kestävät desinfioinnin käyttökertojen välillä. Tee hammashoitoyksiköstäsi mahdollisimman tuottava hyödyntämällä tätä käytännöllistä ja hygieenistä ratkaisua.



Joustavat instrumenttivarret

Q-yksikön imuletkuvarrella on useita eri kokoonpanovaihtoehtoja, jotka vastaavat erilaisten hammasalan ammattilaisten tarpeisiin. Yksikkö voidaan helposti mukauttaa joko kaksikätiseen tai nelikätiseen työskentelyyn. Q-hammas-hoitoyksikkö toimii alustana haluamallesi teknologialle – tee siitä juuri sinun näköisesi.

Imuletkuvarren eri asennusvaihtoehdot:

- Potilastuolin taakse
- Asennettuna hammashoitoyksikköön
- Asennettuna kaappiin

Voit valita seuraavista ominaisuuksista, jotka voidaan integroida imupäähän:

- Käyttöliittymät yksikön toimintojen ohjaamiseen
- Erilaiset määrät ja yhdistelmät korkean ja matalan tehon imuja
- Instrumentit kuten ruiskut, suukamerat ja valokovettajat
- Lisävarusteena erittäin tehokas imu yhdistettynä sylkykupin korvaavaan ratkaisuun paremman hygienian takaamiseksi



Unit-kiinnitteinen J-putki

Vasemmalta oikealle ulottuva kaksikätin imuletkuvarsi mahdollistaa ergonomisen työskentelyn molemmilla käsillä. Tukeva ja laadukkaasti valmistettu metallinen imuletkuvarsi on modulaarinen, joten siihen voidaan asentaa tarvittavat instrumentit juuri sopivaan asentoon. Lisävarusteena J-putkeen voidaan asentaa tarjotin, ja se on yhteensopiva kaikkien Finndentin potilastuolien kanssa.

Unit-kiinnitteinen imuvarsi

Erittäin joustava teleskooppinen imuletkuvarsi yltää kaikkiin tarvittaviin työasentoihin. Ergonomia on erinomainen ja imutoiminto toimii sujuvasti kaikissa kliinisissä toimenpiteissäsi.



Imuvarsi asennettuna kaappiin

Kaappiin asennettavat vaihtoehdot tarjoavat edistyksellistä ergonomiaa ja mahdollistavat nelikäätisen työskentelyn. Kaappipohjainen imuratkaisu tekee laajoista rakennustöistä klinikalla tarpeettomia, sillä lattiaa ei välttämättä tarvitse avata. Yhdistettynä kattokiinnitteiseen yksikköömme tämä ratkaisu on markkinoiden edistyksellisin ja samalla kustannustehokkain asennusvaihtoehto.

Potilastuoli

Finndentin potilastuolit on suunniteltu täysin ergonomisiksi ja tarjoamaan miellyttävän hoitokokemuksen sekä hammaslääkärille että potilaalle.

FD-5000Q on meidän premium-ratkaisumme, ja se on valmistettu sinkkigalvanoidusta teräsrungosta sekä muotoillusta ja märkämaalatusta alumiinisesta selkänojasta ja istuimesta. FD-5000Q-potilastuoli tunnetaan luotettavuudestaan ja pitkäikäisyydestään.

Sisäänrakennettu kääntötoiminto mahdollistaa joustavan työskentelyn, sillä istuin voidaan kääntää 30°. Liikuteltavat käsinojat helpottavat potilaan pääsyä tuoliin. Tuoli tarjoaa rennon asennon keskusteluihin ennen ja jälkeen hammashoitoa.

FD-3600Q on klassinen valinta potilastuoliksi. Molemmat potilastuolit ovat saatavilla 10 vakiovärisssä, ja verhoiluun on lähes rajattomasti räätälöitäviä värivaihtoehtoja, jotka on valmistettu hygieenisestä keinonahasta. Molempiin tuoleihin on saatavilla myös pehmeä Soft Gel -pehmuste.

Lisävarusteena saatava lyhyt jalusta vähentää tuolin tarvitsemaa lattiapinta-alaa ja mahdollistaa hammaslääkärille optimaalisen työasennon mahdollisimman lähellä potilasta.

Potilastuolimme voi nostaa vaakatasossa olevan potilaan jopa 100 cm korkeuteen, mikä mahdollistaa hammasalan ammattilaiselle oikean seisomatyöasennon.



Dental chair options	x included	o optional	– unavailable	3600Q	5000Q
Articulated neck rest		o		o	o
Articulated head rest	x			x	x
Standard upholstery (10 colors available)	x			x	x
Custom upholstery		o		o	o
30° swivel-mounted chair			–		x
Lifting height 100cm			–		x
Fixed armrests	x			x	x
Moving armrests			–		o
Suction arm mounted on the chair with a J-pipe		o		o	o
Extra-wide backrest (available if no armrests are ordered)		o		o	o
Kneebreak	x			x	x
Synchronized tilting of seat, footrest and backrest	x			x	x
Unit foot control dock	x			x	x
Extended chair base		o		o	o
Right and left side foot controls for manual positioning	x			x	x
4 programmable memory positions for automatic positioning	x			x	x
Separate power supply for dental chair	x			x	x
Mounting plate (when installed with the dental unit)		o		o	o
Integrated holder for the foot control for clean ups			–		x

Verhoilu

Potilastuolin verhoilu on saatavilla 10 eri vakiovärissä ja kolmella eri mukavuustasolla. Räätelöitäviin väreihin kuuluu satoja vaihtoehtoja, joten voit sovittaa potilastuolin verhoilun mahdollisimman tarkasti klinikkasi sisustukseen.

Lisäominaisuutena Finndent tarjoaa potilastuoliin kolme erilaista verhoilun mukavuustasoa:

- Vakioverhoilu
- Soft gel -verhoilu
- Formax-verhoilu lannerangan tuella

Verhoilun jäykkyys ja mukavuustaso vaikuttavat potilaan ergonomiaan ja hoitokokemukseen. Korkealaatuiset materiaalit mahdollistavat verhoilun jatkuvan ja helpon puhdistamisen. Lisävarusteena on saatavilla korotustyyny lapsipotilaille.



211
Black



264
Dental White



273
Silk Grey



112
Anthracite



215
Planet Blue



328
Ocean Blue



274
Aqua Marine Green



185
Emeral Green



190
Orchid Lila



182
Sunset Orange

Värit voivat poiketa todellisuudessa. Jos haluat varmistua sävystä, pyydä värinäyte paikalliselta jälleenmyyjältäsi.

Ergonomia

Q-hammasyksiköt on suunniteltu työergonomia keskiössä. Käyttäjälähtöinen suunnitteluprosessi on ollut ratkaiseva, jotta yksiköstä on saatu mahdollisimman helppokäyttöinen, intuitiivinen ja mukava – myös pidempien hoitajaksojen aikana. Q-yksikkö sopii kaikenkokoisille ja -muotoisille käyttäjille. Potilastuolit on suunniteltu niin, että potilas pysyy mahdollisimman paikallaan, mikä helpottaa tarkkaa työskentelyä. Instrumentit on sijoitettu helposti ulottuville.

Uskomme, että huolellinen ergonomiaan panostaminen parantaa kehon toimintaa ja tekee työskentelystä tehokkaampaa.


Kaikissa Q-yksiköissä on edistykselliset ilmajarrut instrumenttisillassa, mikä tekee hoitotilanteista sujuvampia. Ilmajarrut aktivoituvat aidolla kosketuksella. Varren laakereissa on teollisuusluokan vähäkitkaiset komponentit, jotka mahdollistavat vakaat ja jatkuvat liikkeet.

Erittäin hyvin tasapainotetut piiskavarret kuuluvat maailman parhaisiin: käsiin kohdistuu vähemmän rasitusta ja instrumenttien putoaminen lattialle on lähes mahdotonta. Tämä auttaa säilyttämään sekä kehon että työkalut ihanteellisessa kunnossa.


Toinen tapa parantaa hoituhuoneen ergonomiaa on edistynyt instrumentti-integraatio, jonka avulla voit siivota työpisteen niistä työkaluista, joita et sillä hetkellä käytä. Vähemmän sotkua tarkoittaa vähemmän stressiä.

Valaistus on myös tärkeä osa työergonomiaa, ja kaikki hammasyksikkömme on varustettu huippulaadukkailla LED-valoilla. Laadukas valo, paras mahdollinen värispektri ja varjojen poistaminen luovat ihanteelliset olosuhteet klinikalle, mikä vähentää silmien rasitusta ja päänsärkyjä.

Lisävarusteena saatava Theiatech-valaistusteknologia vähentää valon intensiteetin kontrastia suun ja muun työalueen välillä.

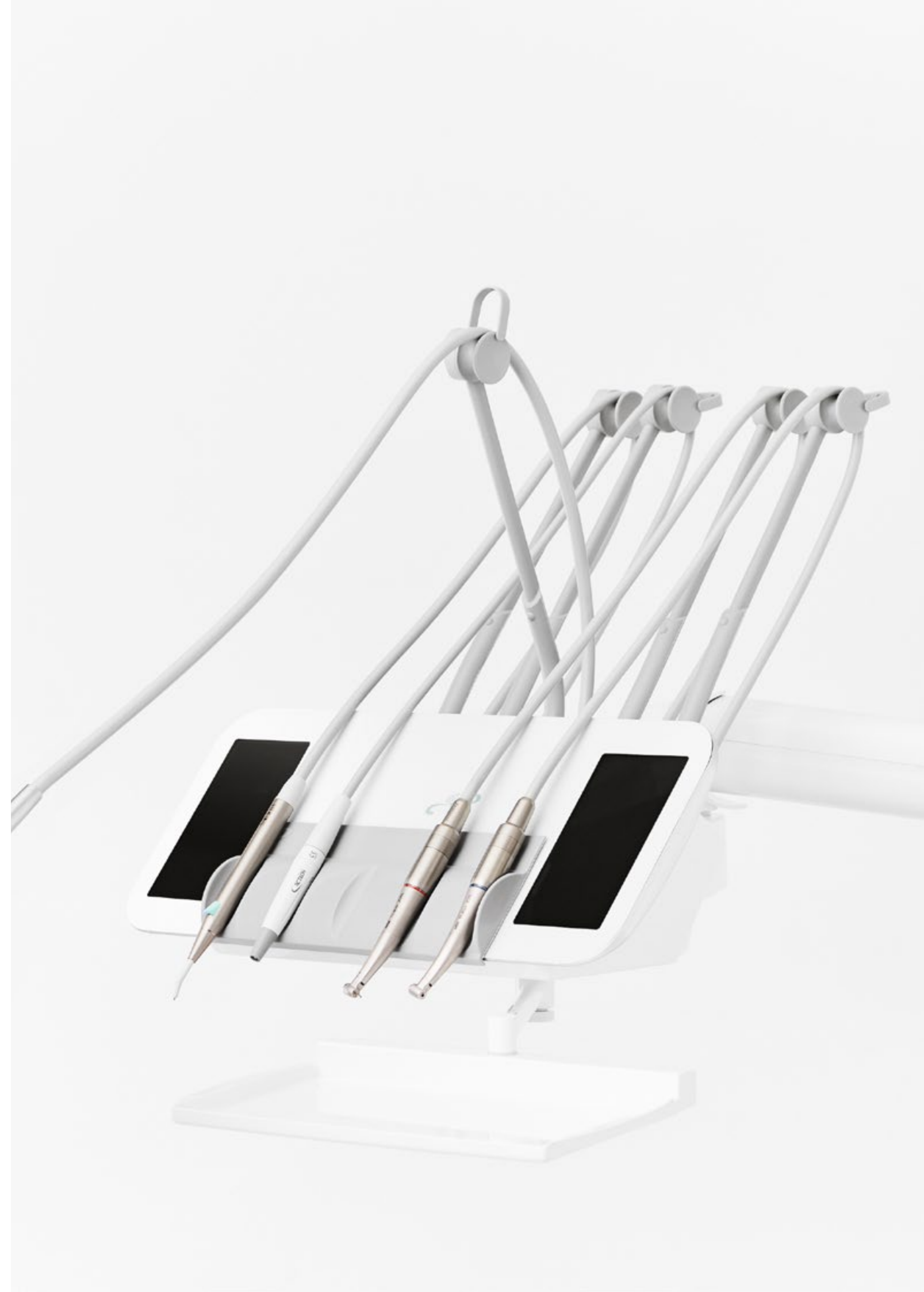

Q Ergonomia

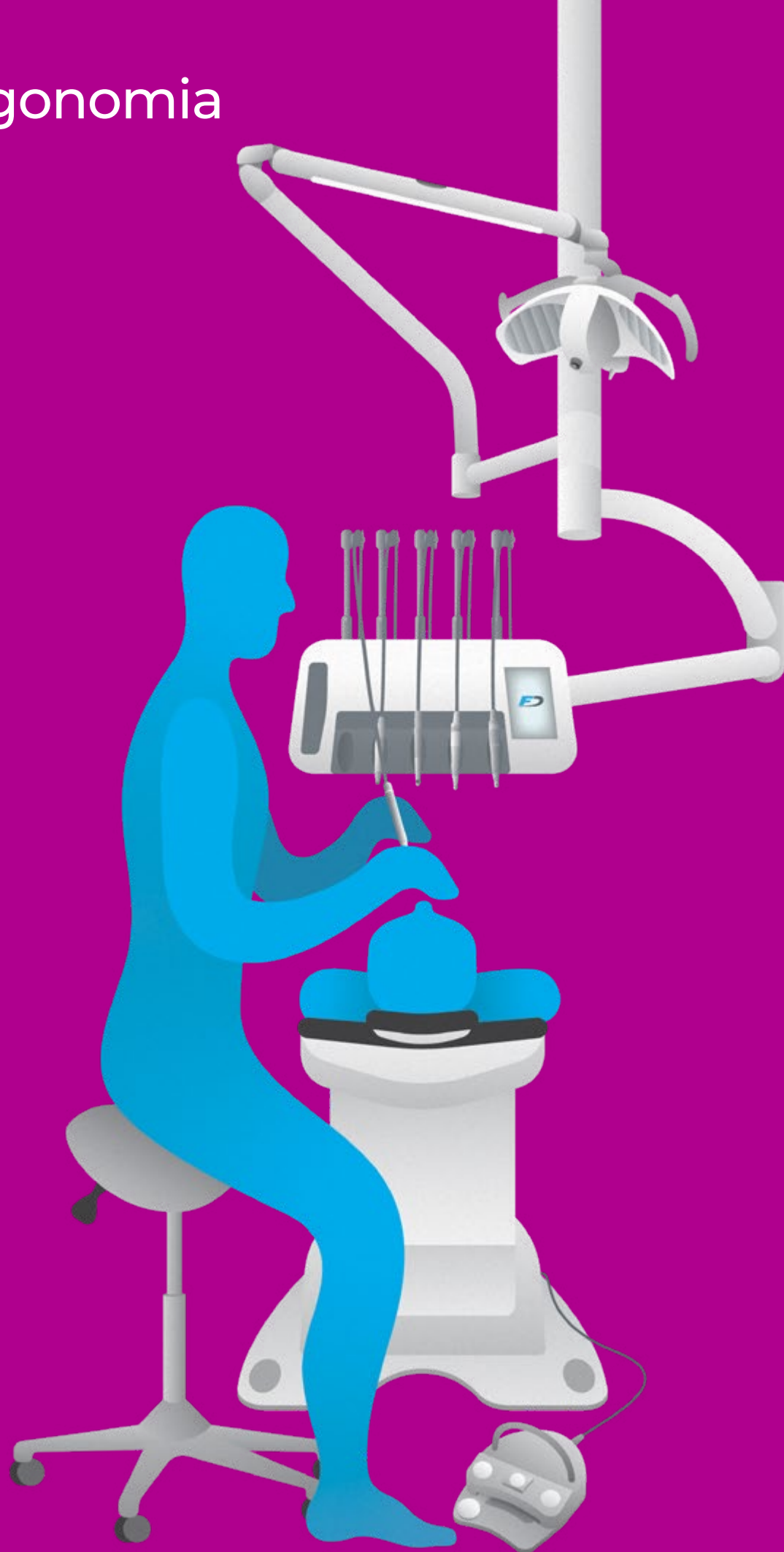

Yksikön koko

Pienikokoinen hoitoyksikkö sekä potilastuolin lisävarusteena saatava lyhyt jalusta lisäävät vapaata lattiapinta-alaa, jolloin voit työskennellä mahdollisimman lähellä potilasta ja liikkua vapaammin.

Valaistus

Laadukas valo sekä lisävalaistus, joka tasapainottaa operatiivisen alueen ja muun työtilan kontrastia, ovat olennaisia silmien hyvinvoinnille.

Liikkuvuus

Instrumenttisillan ilmajarrut aktivoituvat automaattisesti kosketuksella. Kestävät teollisuuslaakerit mahdollistavat sujuvan liikkeen. Instrumenttisillan tasapainotetut piiskavarret vähentävät käsien ja käsivarsien rasitusta. Jalkakytkimessä on minimoitu sivuttaisliike, mikä vähentää polviin kohdistuvaa kuormitusta.

Työskentelyasento

FD-5000Q-potilastuoli mahdollistaa ihanteellisen seisomatyöasennon, sillä tuoli nousee jopa 100 cm korkeuteen. Työjakkarat tukevat ergonomista istuma-asentoa, mikä on tärkeää selän hyvinvoinnille.

Potilaskokemus

Positiivinen hoitokokemus on ratkaisevaa potilaan palaamisen kannalta. Siksi potilaan hyvinvointi on ollut itsestään selvä suunnittelun lähtökohta Q-yksikössä. Potilastuoli, sen niskatuki ja käsinojat on suunniteltu tarjoamaan mahdollisimman mukavaa tukea hoidon aikana.

Uskomme myös, että hyvin suunniteltu hammasyksikkö näyttää luotettavalta ja miellyttävältä, toivottaa potilaan tervetulleeksi eikä herätä pelkoa – näin voidaan vähentää mahdollista hammashoitoon liittyvää jännitystä.

Näytöt

Q-yksikön näytöt ovat lääketieteellistä laatua olevia korkealaatuisia tuotteita. Näytöissä on tyylikäs lasipinta ja valinnaiset kosketustoiminnot. Näyttöteknologia on tarkkaa ja elävää – täydellinen klinisiin käyttötarkoituksiin. Näytön koko on suunniteltu sopimaan työskentelyalueelle häiritsemättä hoitotilannetta. Laadukas näyttö mahdollistaa uusien teknologioiden integroinnin työskentelyyn ja tekee klinikastasi tulevaisuuden tarpeisiin valmiin vuosiksi eteenpäin.

Näyttö tarjoaa useita vaihtoehtoja yksiköllesi, kuten:

- Intraoraaliskannerin kanssa työskentely
- Röntgenkuvien tarkastelu
- Suukameran käyttö
- Valaisimeen integroidun kameran käyttö
- Kliinisten tietojen tarkastelu
- Erilaisten vastaanoton ohjelmistojen ja digitaalisten sovellusten käyttö

Näyttö voidaan asentaa useisiin eri paikkoihin:

- Klassiseen lattiamalliseen hoitoyksikköön
- Kattokiinnitteiseen yksikköön
- Erilliseen kattotelineeseen
- Kattoon potilaan iloksi
- Työtasolle tai näyttötelineeseen klassiseksi työasemaksi

Digitaalisen työnkulun navigointi ei ole koskaan ollut näin helppoa kosketusnäytön avulla. Tervetuloa tulevaisuuteen.

Teräväpiirtonäyttö

Teräväpiirtonäyttö on saatavilla lisävarusteena Q-yksikköön, ja siihen voidaan liittää haluamasi klinikan sovellukset ja teknologiat. Näyttö on erinomainen ratkaisu tulosten analysointiin ja esittämiseen potilaille sekä erilaisiin opetustarkoituksiin.



Räätälöity ratkaisu

Kaikki Q-yksiköt valmistetaan yksilöllisesti vastaamaan hammasalan ammattilaisten erityistarpeita ja henkilökohtaisia odotuksia. Tuotteidemme modulaarinen rakenne mahdollistaa valtavan määrän erilaisia kokoonpanoja ja ominaisuuksia.

On meille selvää, että myös hammaslääkärit ovat eri kokoisia ja muotoisia, minkä vuoksi ergonominen yksikkö, joka mukautuu käyttäjän fyysisiin mittoihin, on välttämätön.

Fyysisen rakenteen lisäksi Q-yksikön ominaisuudet on suunniteltu vastaamaan hammaslääkäriin työn tasoa ja erikoistumista. Q on hammasyksikkö, joka kehittyy kanssasi urasi mukana. Mitä pidemmälle kehityt ammatissasi, tarvitset vain päivityksiä, jotka mukauttavat yksikkösi taitojesi ja hammaslääketieteen jatkuvasti muuttuvien tarpeiden mukaan.

Rethinking Dental tarkoittaa meille palveluiden laajentamista pelkän yksikön myynnin sijaan. Meille hammasyksikkö on ammattilaisen työkalu, joka on suunniteltu huollettavaksi, korjattavaksi ja päivitettäväksi. Kestävyys tarkoittaa meille laadukasta ja pitkäikäistä rakennetta sekä modulaarisia, korjattavia ratkaisuja, jotka vähentävät kulutusta.

Olemme saavuttaneet tavoitteemme, kun hammasalan ammattilainen saa yksilöllisesti räätälöidyn Q-yksikön, jota hän voi käyttää mahdollisimman pitkään.

Jokainen valmistamamme yksikkö on ainutlaatuinen, tilauksesta rakennettu ja käsin koottu, jotta voimme taata mahdollisimman korkean laadun. Me Finndentillä keskitymme tarjoamaan asiakkaillemme huolellisesti suunniteltuja ja valmistettuja ratkaisuja, jotka kestävät koko uran ajan.

Q-yksikkö on saatavilla yli
17 miljoonassa eri modulaarisessa
kokoonpanossa.



Pohjoismainen muotoilu

Pohjoismainen muotoilu keskittyy toiminnallisuuteen, mikä näkyy kauniina, selkeinä muotoina, minimalistisina siluetteina ja pitkäikäisten, laadukkaiden materiaalien käytössä. Pohjoismainen muotoiluideologia tuottaa esineitä, jotka ovat hyvin valmistettuja, aitoja ja ajattomia.

Q-yksikkö, minimalistisen muotoilunsa, pyöristettyjen kulmiensa ja käytännöllisen kokonsa ansiosta, ei ole vain toiminnallinen vaan myös esteettisesti miellyttävä ja inspiroiva hoituhuoneen keskipiste. Vaikka Q-yksikkö on ensisijaisesti lääketieteellinen laite, se on myös designtuote, joka tuo oman visuaalisen arvonsa hammaslääkäriin tilaan.

Me Finndentillä uskomme, että ihanteellisen vastaanoton toiminnallisuus ulottuu lääketieteellisten laitteiden lisäksi myös ympäröivään sisustukseen, jossa esimerkiksi ääni ja esineet näyttelevät tärkeää roolia.

Uusi yhteistyösarjamme Finndent X tuo esiin muita pohjoismaisia brändejä, jotka jakavat kanssamme laadun ja toiminnallisuuden muotoiluideologian. Uudet tuotteet ja palvelut mahdollistavat asiakkaillemme ihanteellisen työympäristön rakentamisen – aivan kuten he voivat räätälöidä hammashoitoyksikkönsä omien yksilöllisten tarpeidensa mukaan.




FINNDENT X

Finndent X on yhteistyösarja, jossa on tällä hetkellä mukana kaksi ikonista suomalaista brändiä: Artek ja Genelec. Omien hammasyksiköidemme lisäksi haluamme tarjota asiakkaillemme parasta suomalaista muotoilua – kuten Genelecin huipputeknistä äänentoistoa ja Artekin laadukkaita designkalusteita.

Uskomme, että ihanteellisen hammaslääkäritilan toiminnallisuus ulottuu lääketieteellisten laitteiden lisäksi myös ympäröivään sisustukseen, jossa ääni ja esineet näyttelevät tärkeää roolia. Ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjäsi saadaksesi lisätietoa räätälöidystä äänisuunnitelmasta ja asennuksesta klinikallesi. Vaihtoehtoisesti voit tutustua siihen, miten voit sisustaa päivittäisen työympäristösi ajattomilla pohjoismaisen muotoilun klassikoilla.

Lue lisää:
www.finndent.com/x



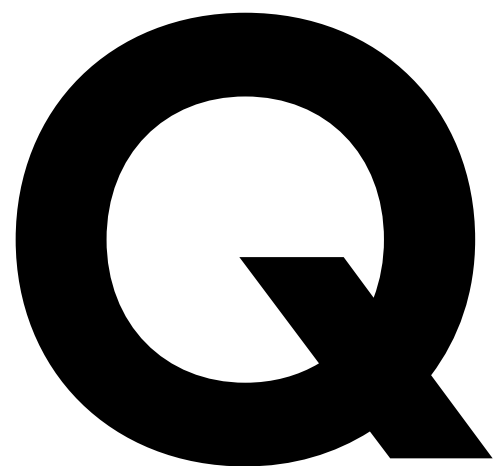

by

FD FINNDENT

Lisätietoa tuotteista ja palveluista
verkkosivuillamme:

www.finndent.com



