

VALO  
GRAND

VALO

UP  
ULTRADENT  
PRODUCTS, INC.



#### VALO Grand Cordless Kit

- 1 x VALO Grand LED-valokovettaja
- 4 x ladattavia paristoja
- 1 x paristolaturi
- 1 x virtalähde yleispistokkeella, paristojen lataamiseen
- 1 x valosuoja
- 1 x käsikappaleen pidike
- 1 x suojaussien näytepakkaus

- 5972 Black
- 4864 Sapphire
- 4865 Red Rock
- 4866 Midnight

#### VALO Cordless Kit

- 1 x VALO LED-valokovettaja
- 4 x ladattavia paristoja
- 1 x paristolaturi
- 1 x virtalähde yleispistokkeella, paristojen lataamiseen
- 1 x valosuoja
- 1 x käsikappaleen pidike
- 1 x suojaussien näytepakkaus

- 5941 Black

#### VALO Grand Corded Kit

- 1 x VALO Grand LED-valokovettaja - johto 2,13 m
- 1 x virtalähde yleispistokkeella - johto 1,83 m
- 1 x käsikappaleen pidike
- 1 x valosuoja
- 1 x suojaussien näytepakkaus

- 5971 Black

#### VALO Corded Kit

- 1 x VALO LED-valokovettaja - johto 2,13 m
- 1 x virtalähde yleispistokkeella - johto 1,83 m
- 1 x käsikappaleen pidike
- 1 x valosuoja
- 1 x suojaussien näytepakkaus

- 5919 Black

#### VALO & VALO Grand Linssitarvikkeet

- 4082 VALO Grand PointCure 2 kpl
- 5934 VALO PointCure 2 kpl

- 4081 VALO Grand ProxiCure 2 kpl
- 5936 VALO ProxiCure 2 kpl

- 4084 VALO Grand Translume 2 kpl
- 5937 VALO Translume 2 kpl

- 4319 VALO Grand Black Light 1 kpl
- 5939 VALO Black Light 1 kpl

- 4658 VALO Grand Interproximal 2 kpl
- 4629 VALO Interproximal 2 kpl

- 4628 VALO Grand White Light 2 kpl

5  
YEAR  
WARRANTY



TÄYDELLINEN KATTAVUUS!

BLACK | RED ROCK | SAPPHIRE | MIDNIGHT

SEURAA MEITÄ!



© 2022 Ultradent Products, Inc. All Rights Reserved.

UPP 410-FI 03-2022

ULTRADENT.EU

UP  
ULTRADENT  
PRODUCTS, INC.

KAIKKI TÄYSIN UUDENLAISEN JA PALKITUN  
**VALO™ VALOKOVETTAJAN**  
 EDUT JA LISÄKSI 50 % SUUREMPI LINSSI.

SAATAVANA KAIKISSA VALO-VALOKOVETTAJISSA



**YLIVERTAINEN TEHO**

Ultrasuuritehoiset laajakaistaiset ledit tuottavat suuritehoista valoa jonka säteilyteho on 800–2300 mW/cm<sup>2</sup>



**USEITA AALLONPITUUKSIA**

Erityiset LEDit kolmella aallonpituudella polymeroivat kaikki valokovetteiset dentaalimateriaalit.



**KESTÄVÄ UNIBODY-RAKENNE**

Erittäin kestävä ja kevyt valokovettaja on valmistettu yhtenäisestä, karkaistusta ja korkealaatuisesta avaruusalumiinista, joka on käsitelty CNC-hionnalla.



**ULOTTUVUUS**

11 mm:n korkuinen pää ulottuu helposti ja suoraan kaikkiin kovettaviin kohtiin.



**RAJATTU VALOKEILA**

Optimaalisesti rajattu valokeila varmistaa yhtenäisen ja tasaisen tehon.



**TASAISEMPI KOVETUSTULOS**

Ainutlaatuinen lasilinssijärjestelmä muodostaa rajatun valokeilan, jonka ansiosta kovetustulos on tasainen.



**PALKITTU**

VALO-tuotesarjan valokovettajat ovat voittaneet useita Reality 5 Star -palkintoja, Townie Choice -palkintoja ja Pride Institute "Best of Class" Technology -palkintoja. Lisäksi se on useita kertoja nimetty yhdeksi Dentistry Today's Top 50 Technology Products -tuotteista.

AINOASTAAN VALO GRAND -VALOSSA



**SUURI KÄRJEN HALKAISIJA**

VALO Grand -valon linssin halkaisija on 12 mm, ja se pystyy kattamaan 107 mm<sup>2</sup>:n alueen.



**LISÄKSI KOVETUSPAINIKE**

Laitteen alapuolella oleva kovetuspainike helpottaa intuitiivista käyttöä.



Kaikki VALO LED-valokovettajat käyttävät tavallista moniaallonpituuksista LED-valoa tuottaen korkean intensiteetin valoa 385–515 nm:n alueella. Valo pystyy polymeroimaan kaikki valokovetteiset dentaalimateriaalit.

Kaikissa VALO-tuotesarjan valokovettajissa on kolme kovetustilaa, joista voidaan valita juuri tarpeisiin sopiva vaihtoehto.

**VALO GRAND LINSSITARVIKKEET LISÄTOIMINNOT NAPSAHTAEN**



**INTERPROXIMAL LENS**

Fokusoitu 1 mm valkoinen valo auttaa havaitsemaan kariesta hammasväleissä.



**TRANSLUME™ LENS**

Auttaa havaitsemaan halkeamia ja defektejä hampaissa ja protetiikassa.



**PROXICURE™ BALL LENS**

Painaa matriisin kontaktiin kovettaessa II luokan täyhteitä.



**BLACK LIGHT LENS**

Näyttää fluoresoivat kemikaalit eri hammashoitomateriaaleissa.



**POINTCURE™ LENS**

Kovettaa 2,5 mm pyöreän alueen auttaen täyteen sijoittelussa ja vaiheittaisessa kovetuksessa






**WHITE LIGHT LENS**

Puhdasta valkoista valoa sävyjen tarkkaan määrittämiseen.

**KATTAVUUSALUEEN VERTAILU**

10 MM  
KATTAVUUS  
MOLAARISSA

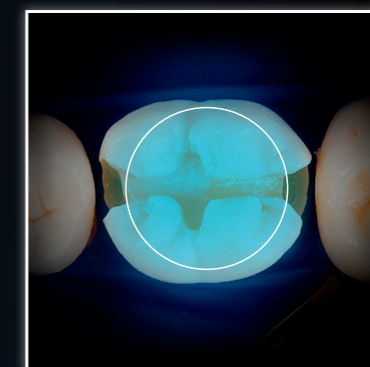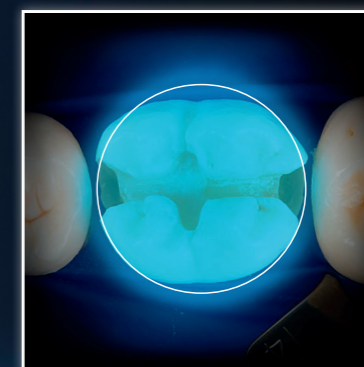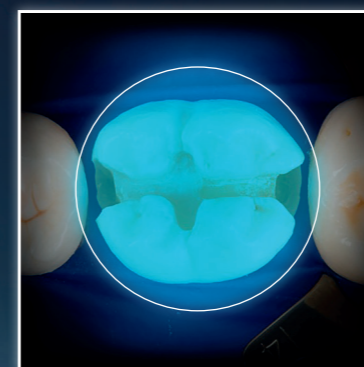

**VALO™**  
GRAND

**VALO™**

KILPAILEVAN  
VALMISTAJAN  
KESKIMÄÄRÄINEN

PINTA-ALA

**107**  
mm<sup>2</sup>

**78**  
mm<sup>2</sup>

**46**  
mm<sup>2</sup>